

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] 2

La Culture Zirkonzahn


RESTAURATION IMPLANTAIRE EN ZIRCONE PRETTAU® 2 DANS LA MÂCHOIRE SUPÉRIEURE

Situation initiale :

Le cas présenté ici décrit un traitement effectué sur une patiente qui portait une restauration maxillaire insatisfaisante et six implants déjà en place

Réalisation :

- *Prise de l'empreinte et enregistrement du mordu avec la restauration existante*
- *Conception d'une restauration provisoire implanto-portée dans le logiciel Zirkonzahn.Modellier ainsi que d'une barre en titane pour une meilleure stabilisation*
- *Fraisage du provisoire en résine Prime, stratification avec Gingiva-Composites et insertion par friction sur la barre dans la bouche du patient*
- *Après une évaluation positive par le dentiste et la patiente, la restauration temporaire a servi de base à la conception de la prothèse finale en zircone dans le logiciel Zirkonzahn.Modellier*
- *Dans le logiciel Zirkonzahn.Nesting, la restauration finale a été positionnée dans le bloc de zircone Prettau® 2 et fraisée avec la fraiseuse M2 Teleskoper*
- *Pré-infiltration du bord incisif avec Colour Liquid Waterbased Diluant pour générer de nuances de couleurs naturelles, coloration de la zircone avec Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell 0M2 (tonalité Bleach) et caractérisation additionnelle avec Colour Liquid Prettau® couleurs intensives*
- *Stratification de la gencive avec Fresco Ceramics, caractérisation avec ICE Stains 3D Blue Lightning by Enrico Steger et glaçage avec ICE Stains 3D Base Glaze*
- *Anodisation dorée de la barre et collage avec la restauration en zircone*

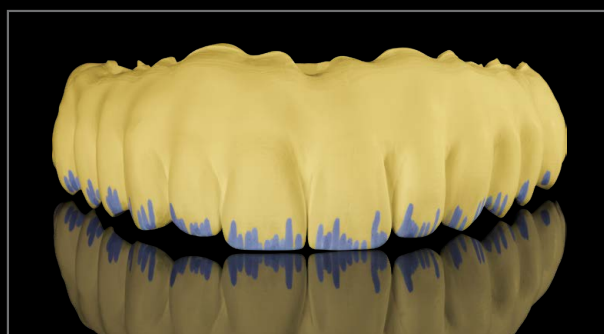

100 % ESTHÉTIQUE, STRATIFICATION SEULEMENT DANS LA PARTIE GINGIVALE

Dr Harel Simon – Beverly Hills, USA

Mpd Marco Heidel – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tyrol du Sud, Italie

Proth. Dent. Bart Ziengs – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tyrol du Sud, Italie





NOUVEAU ! PRETTAU® 2

- Zirconium hautement translucide avec une extraordinaire résistance à la flexion
- **Aucune limitation ! Particulièrement adaptée pour les arcades complètes (monolithiques ou réduites à stratifier avec de la céramique), mais aussi pour couronnes unitaires, inlays, onlays, facettes, barres et bridges à plusieurs éléments**
- Pas d'écaillage de la céramique (grâce à la conception anatomique) ; pas d'abrasion de l'antagoniste
- Caractérisation individuelle avec les *Colour Liquids Prettau® 2 Aquarell, ICE Ceramics, Fresco Ceramics* et les teintes maquillantes *ICE Stains 3D by Enrico Steger*
- Aussi disponible avec des nuances de couleurs naturelles (*Prettau® 2 Dispersive®*)



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY


Rotec – Tél +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com


NOUVEAU ! 1 ORBITE – 4 DIAMÈTRES 125, 106, 98 ET 95 mm

FRAISEUSES M2 – LIGNE CONFORT AVEC **TELESKOPER ORBIT EXTRA LARGE**.
COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUES, FLEXIBLES, **SANS VIBRATIONS**

SURFACE DE FRAISAGE PLUS GRANDE POUR LES BLOCS DE Ø 95 mm

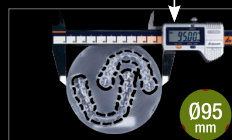

2 plaques occlusales

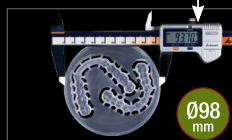


2 plaques occlusales



3 plaques occlusales

Ø125 mm

4 plaques occlusales

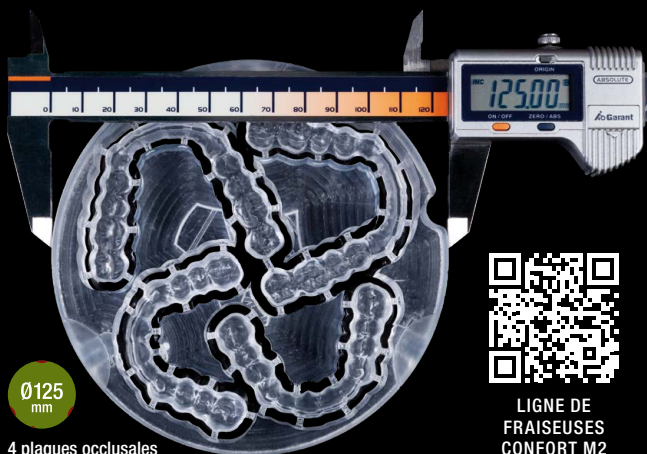

LIGNE DE
FRAISEUSES
CONFORT M2



WEAB2695FR=