

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] 2

A cultura Zirkonzahn

RESTAURAÇÃO COMPLETA EM PRETTAU® 2 COM BASES DE TITÂNIO ANODIZADAS


Situação inicial: Paciente idoso, estrutura dentária gravemente debilitada, periodontite grave e atrofia óssea

Dados do paciente: Fotos, digitalizações faciais 3D, situação da boca digital, dados de raios X, modelos mestre, restaurações imediatas temporárias desgastadas

Restauração planejada: Pontes completas mandibular e maxilar feitas de Prettau® 2 zirconia sobre barras em titânio anodizado, posicionamento ideal dos implantes através de cirurgia guiada

Processo:

- Extração dentária múltipla, análise estética e funcional abrangente e aumento ósseo de 13–23, colocação de implantes guiada por modelo com restauração imediata
- Registo digital da situação do paciente com scanners faciais 3D Face Hunter e PlaneSystem®, articulação e correspondência de dados, definição de DVO
- Modelação e fresagem de protótipos de longa duração em plástico Temp Premium
- Após vários meses de uso: digitalização dos protótipos para a restauração final, avaliação dos aspectos estéticos, funcionais e fonéticos
- Fabrico das barras de titânio, bem como das pontes superiores e inferiores em zirconia Prettau® 2
- Coloração das pontes com líquidos de coloração e sinterização das estruturas
- Finalização das pontes de zirconia com ICE 3D Stains by Enrico Steger
- Revestimento na zona anterior e gengival com cerâmica ICE Ceramics
- Anodização e cimentação das bases de titânio nas estruturas de zirconia
- Controlo no articulador e posterior colocação na boca do paciente

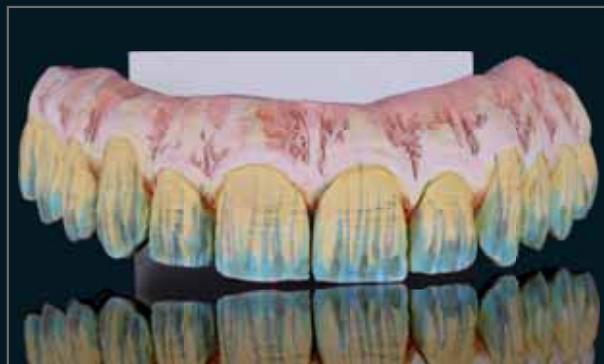

100% CRIADO DIGITALMENTE, REVESTIMENTO ESTÉTICO MÍNIMO COM CERÂMICA

TPD Antonio Corradini – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tirol do Sul, Itália

DDS Francisco García Torres – Universidad de La Salle Bajío, México

DDS Eric Sánchez – Dentlab Esthetic, Aguascalientes, México



A restauração correspondeu às expectativas do paciente tanto esteticamente como funcionalmente. Os check-ups regulares não mostram quaisquer complicações. Apesar da difícil situação inicial, o paciente foi capaz de receber cuidados de alta qualidade e a longo prazo.



NOVO! PRETTAU® 2

- Zirconia particularmente translúcida com uma excelente resistência à flexão
- Sem limitações! Particularmente indicado para arcadas totais (anatómicas ou reduzidas com revestimento de cerâmica), mas também para coroas individuais, inlays, onlays, facetas, barras e pontes de vários elementos
- Sem chipping de cerâmica graças ao desenho anatómico e sem abrasão do antagonista
- Possível de caracterizar individualmente com os Colour Liquids Prettau® 2, ICE Ceramics e ICE 3D Stains by Enrico Steger
- Disponível com gradiente de cores naturais (Prettau® 2 Dispersive®)



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Portugal – Luis Macieira – Tel +351 217 58 62 69 – zirkonzahnportugal@clix.pt

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com


NOVO! 1 ÓRBITA – 4 DIÂMETROS 125, 106, 98 E 95 MM

GAMA DE FRESADORAS CONFORT M2 COM EXTRA-LARGE TELESKOPER ORBIT. TOTALMENTE AUTOMÁTICAS, VERSÁTEIS, SEM VIBRAÇÕES.

MAIOR ALCANCE DE FRESAGEM PARA Ø 95 MM



2 x goteiras

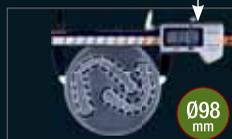


2 x goteiras



3 x goteiras



4 x goteiras

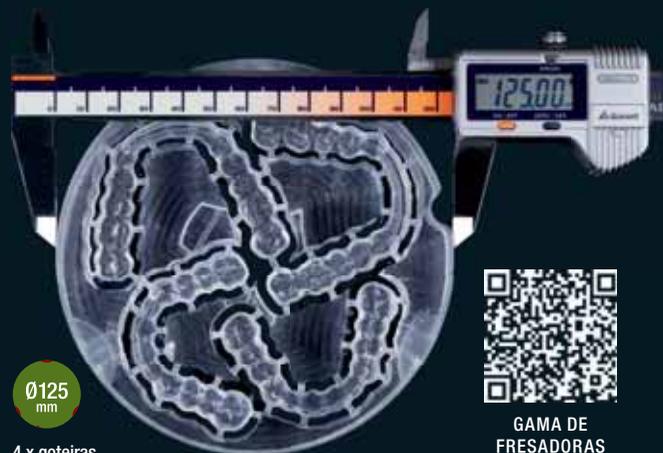

GAMA DE
FRESADORAS
CONFORT M2



WEAB2680PT=