


Allgemeine Anleitung

Zementierung einer Krone aus Zirkon


(Prettau® Anterior®, Prettau® Zirkon, Anatomic Coloured, ICE Zirkon Transluzent)

Benötigte Werkzeuge und Materialien

 Sandstrahler (Aluminiumoxid: Korngröße 110 µm; 3,5 bar)

 Werkzeug zur Entfernung von Zementüberschüssen


 Dampfstrahler

 Trockene ölfreie Druckluft ISO/DIN 7494-2:2014-03


 Glasionomer- oder Phosphat-Befestigungszement*

 * **ACHTUNG!** Bitte die jeweiligen Anweisungen des Produktherstellers beachten! Abweichungen aufgrund vereinfachter Prozessdarstellung möglich.

Vorbereitung/Reinigung der Krone aus Zirkon (Prettau® Anterior®, Prettau® Zirkon, Anatomic Coloured, ICE Zirkon Transluzent)

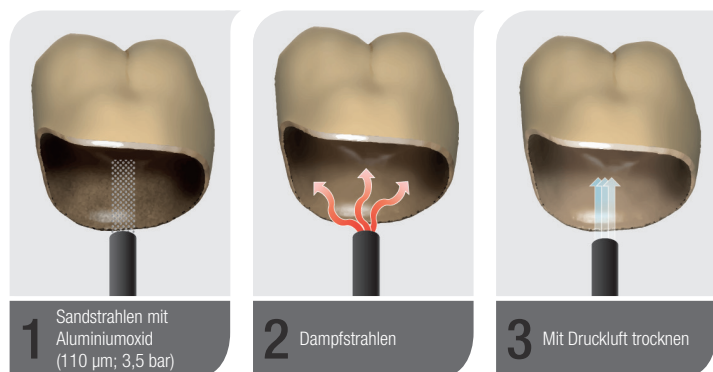

Vorbehandlung/Reinigung des präparierten Zahnes

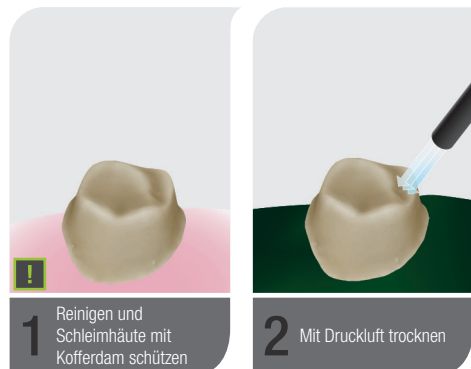

 **Empfehlung zur Vorbereitung des Zahnes:**
Reinigen und Verunreinigungen mit Speichel vermeiden.
Falls notwendig die Zahnpulpa mit Calciumhydroxid schützen.

 * **ACHTUNG!**
Bitte die jeweiligen Anweisungen des Produktherstellers beachten!
Abweichungen aufgrund vereinfachter Prozessdarstellung möglich.

Zementierung der Krone

