

## Instrucciones

### Coloración de la Zirconia con los Color Liquid Prettau® Aquarell




*Trabajo coloreado antes de la sinterización*


La gama de colores Color Liquid Prettau® Aquarell corresponde básicamente a los 16 colores que abarcan el amplio espectro cromático de la guía de colores Vita. Son producidos a base de agua, y no contienen ácido. Para ayuda visual, estos nuevos líquidos contienen bio-pigmentos especiales calcinables, los cuales sirven como marcador y ayudan a orientarse al momento de trabajar para la distribución de los grados del color. Coloraciones individuales o detalles como los mamelones, las áreas interproximales y cervicales, son considerablemente

más sencillas y fáciles de realizar pudiendo obtener más precisión. Durante la sinterización, los bio-pigmentos son calcinados al 100% y se obtienen excelentes restauraciones con el color deseado. El uso de los colores Cervical e Intensivos, añade perfección artística al resultado final.

Junto con los nuevos Color Liquid Prettau® Aquarell, se ha desarrollado una técnica simplificada con el pincel para colorear la zirconia cruda Prettau®.

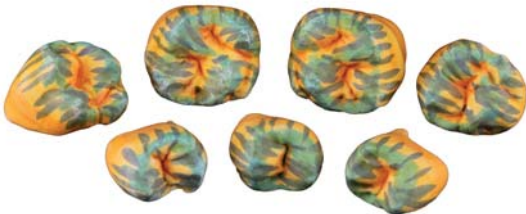

*coloración terminada antes de la sinterización*

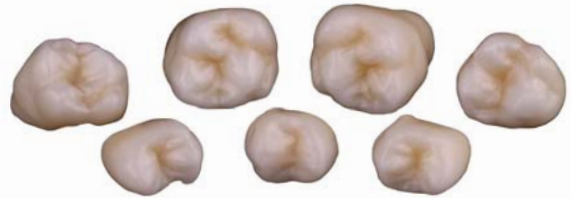

*después de la sinterización*



Colour Liquid Prettau® Aquarell



Pincel sin metal para la aplicación de los líquidos



Pañuelo desechable para secar el pincel



Lámpara de secado



Horno de sinterización

## Instrucciones de aplicación y almacenamiento

Almacenar los Colour Liquids Prettau® Aquarell en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Para obtener un color homogéneo, agitar el frasco antes de usar. Antes de colorear los bloques, sumergir el pincel completamente en los Colour Liquids y simplemente remover el exceso del mismo. Para poder cambiar de color, limpiar el pincel a fondo con agua.



## Instrucciones para colorear un diente anterior

Situación inicial: un diente fresado



Paso	Colour Liquid	Número de aplicaciones	vestibular	palatino
1	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x		
4	<b>Cervical A</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
5	<b>Incisal blue</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	<b>Incisal grey</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	<b>Incisal violet</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	<b>Orange 1</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	<b>Brown 2</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®		

**Secado:** Después del proceso de coloración, se deben colocar los trabajos, con la cara oclusal hacia abajo, sobre el material refractario, bajo la lámpara de secado entre 20-40 minutos, de acuerdo al tamaño de las restauraciones. **Nota:** Un tiempo mayor de secado, no altera los resultados de la coloración. Un tiempo menor SÍ los puede alterar.

## Instrucciones para colorear un diente posterior

Situación inicial: un diente fresado



Paso	Colour Liquid	Número de aplicaciones	bucal	oclusal
1	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x		
4	<b>Cervical A</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x 2x 3x		
5	<b>Incisal blue</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	<b>Incisal grey</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	<b>Incisal violet</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	<b>Orange 1</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
	<b>Brown 2</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		

**Secado:** Después del proceso de coloración, se deben colocar los trabajos, con la cara oclusal hacia abajo, sobre el material refractario, bajo la lámpara de secado entre 20-40 minutos, de acuerdo al tamaño de las restauraciones. **Nota:** Un tiempo mayor de secado, no altera los resultados de la coloración. Un tiempo menor SÍ los puede alterar.

## La gama completa de Colour Liquid Prettau® Aquarell comprende:



### Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4

A base de agua con bio-pigmentos para el coloreado de la Zirconia Prettau® presinterizada, para su aplicación con pincel

**20 ml o 50 ml disponibles en un set o por separado!**



### Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D

A base de agua, sin ácido, con bio-pigmentos, para la coloración de las áreas cervicales, interproximales y las fosas y fisuras oclusales

**Disponible en frascos de 20 ml. Puede utilizarse en Zirconia Prettau®**



### Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensiv

puede utilizarse en Zirconia Prettau®

**Disponible en 20 ml en set o por separado!**

- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue A:** a base de agua, libre de ácido, con bio-pigmentos para la coloración de las áreas gingivales (rosa claro)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue B:** a base de agua, libre de ácido, con bio-pigmentos para la coloración de las áreas gingivales (rosa)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue C:** a base de agua, libre de ácido, con bio-pigmentos para la coloración de las áreas gingivales (rosa-violeta)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal blue:** a base de agua, libre de ácido, con bio-pigmentos, para dar un efecto de profundidad en las áreas incisales
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey:** a base de agua, libre de ácido, con bio-pigmentos, para dar un efecto de translucidez en las áreas incisales
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet:** a base de agua, libre de ácido, con bio-pigmentos para la coloración de las áreas incisales
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1:** a base de agua, libre de ácido, con bio-pigmentos para la coloración de los surcos oclusales
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2:** a base de agua, libre de ácido con bio-pigmentos para la coloración de los surcos y fisuras oclusales



### Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment

**Disponible en 10 ml en set o por separado**

- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment A1-D4:** pigmentos calcinables para retocar los Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Tissue:** pigmentos calcinables para retocar los Colour Prettau® Aquarell Tissue A-C
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Orange:** pigmentos calcinables para retocar los Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1 y Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Brown:** pigmentos calcinables para retocar el Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Grey:** pigmentos calcinables para retocar el Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Violet:** pigmentos calcinables para retocar el Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Blue:** pigmentos calcinables para retocar el Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal blue



### Colour Liquid Waterbased Diluyente

Diluyente a base de agua, para diluir y aclarar todos los Colour Liquids Waterbased, Colour Liquid Prettau® Aquarell, así como los tonos Intensiv y Cervical Prettau® Aquarell.

**100 ml**



### Colour Liquid Waterbased Estabilizador

Sustancia a base de agua para la homogeneización de todos los Colour Liquid Waterbased, Colour Liquid Prettau® Aquarell, así como de las tonalidades cervicales e intensivos Prettau® Aquarell y para la corrección de resultados de coloración (Adición del 5% de estabilizador)

**100 ml**