

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*




**BRIDGE TOUT ZIRCONE**

## *Coloration du bridge*

Après le fraisage le bridge a été désolidarisé du bloc de zircone puis sa face vestibulaire lissée. La partie linguale en forme de « pied » (= socle) a été conservée.

Encore poreuse à ce stade, la zircone a alors été colorée avec les colorants liquides « Color Liquid » (Zirkonzahn), en veillant à ce que la limite entre les dents et les parties gingivales soit bien nette. Le bridge a ensuite été séché sous la lampe de séchage pendant 60 minutes puis il a été enfourné verticalement dans le four zircone pour la cuisson de frittage.

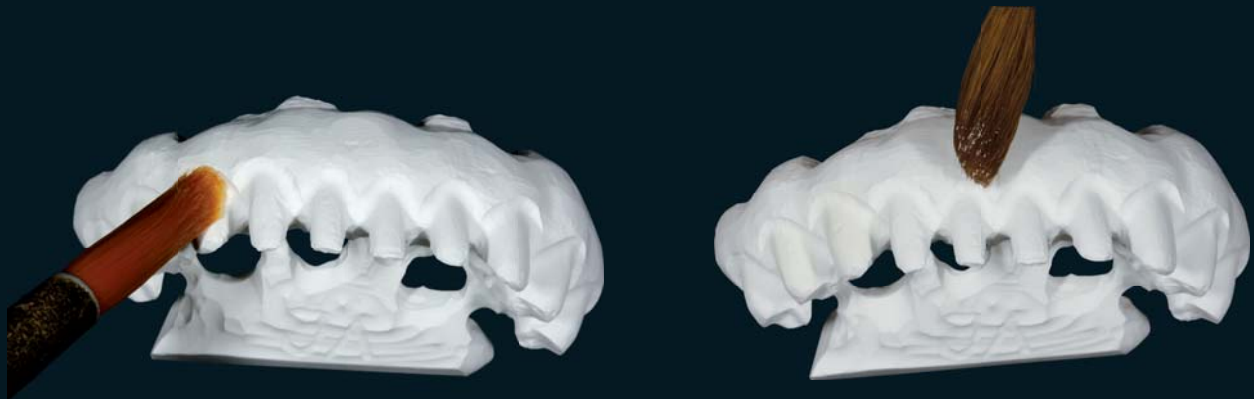

## *Le bridge après cuisson*

Travail réalisé par le prothésiste maître artisan Jürgen Auffarth, (Salzbourg)



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)

ZIRCONLAB - Yves Probst - Tel +33 388 69 55 44 - [zirconlab@wanadoo.fr](mailto:zirconlab@wanadoo.fr) - [www.zirconlab.com](http://www.zirconlab.com)



*Fraisage réalisé avec le pantographe Zirkonzahn*