

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] 3 DISPERSIVE[®]

La Cultura Zirkonzahn

RESTAURO IN ZIRCONIA PRETTAU® 3 DISPERSIVE® SU BARRA IN TITANIO ANODIZZATA

Dati disponibili:


Foto del paziente, scansioni facciali in 3D, situazione orale digitale, modelli master digitalizzati

Restauro pianificato:

Circolare monolitico in zirconia Prettau® 3 Dispersive® per l'arcata inferiore

Fasi di lavoro:

- Riproduzione digitale della situazione orale con lo scanner Face Hunter e il PlaneSystem®
- Primo set-up virtuale con Zirkonzahn.Modifier; personalizzazione delle forme dentali tramite la libreria virtuale "Heroes Collection"
- Modellazione della barra in titanio nel software Zirkonzahn.Modellier sulla base del wax-up del restauro pianificato; fresatura e digitalizzazione della barra e successivo adattamento della struttura in zirconia
- Posizionamento del restauro su Zirkonzahn.Nesting: il gradiente di colore del blocco di Prettau® 3 Dispersive®, realizzato con Gradual-Triplex Technology, consente di allineare in modo ottimale il margine incisale e il colletto rispettivamente nell'area ad alta trasparenza e in quella dalla resistenza alla flessione più elevata
- Fabbricazione del Prettau® Bridge nella fresatrice M2 Dual Teleskoper; sinterizzazione a 1500 °C
- Glasatura del restauro con 3D Base Glaze e caratterizzazione con ICE Stains 3D
- Stratificazione minima della zona gengivale (0,4-0,5 mm) con Gingiva Fresco Fluid; cottura a 760 °C nel forno per ceramica e leggera lucidatura
- Anodizzazione e cementazione della barra in titanio nella struttura; verifica del colore finale con Zirkonzahn Individual Shade Guide Prettau® 3 Dispersive® Tooth 11

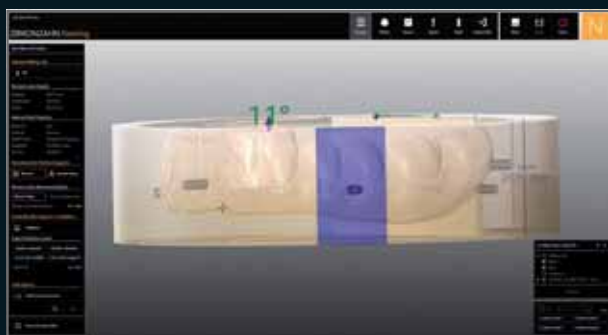

DESIGN 100% MONOLITICO, STRATIFICAZIONE SOLO NELLA ZONA GENGIVALE

Odt. Alexander Lichtmanegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige, Italia





NOVITÀ! ZIRCONIA PRETTAU® 3 DISPERSIVE® CON GRADUAL-TRIPLEX-TECHNOLOGY

- Zirconia caratterizzata già in fase di produzione da un triplo gradiente: colore, traslucenza e resistenza alla flessione:
 1. Resistenza alla flessione decrescente verso il bordo incisale, estremamente elevata a livello del colletto
 2. Traslucenza decrescente verso il collo del dente, estremamente elevata a livello del bordo incisale
 3. Sfumature di colore naturali dalla dentina allo smalto
- Senza limiti! Per corone singole, inlay, onlay, faccette, barre e circolari (restauri ridotti o completamente anatomici); particolarmente adatta per strutture monolitiche
- Nessuna scheggiatura della ceramica (grazie al design monolitico); sinterizzazione rapida delle corone singole
- Caratterizzazione individuale con Colour Liquid Prettau® Aquarell intensivi, ICE Ceramics e ICE Stains 3D by Enrico Steger



* Valore medio di resistenza alla flessione biassiale risultante da diverse serie di test

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOVITÀ! 1 ORBITA – 4 DIAMETRI 125, 106, 98 E 95 MM

GAMMA DI FRESATRICI COMFORT M2 CON EXTRA-LARGE TELESKOPER
ORBIT. AUTOMATICHE, VERSATILI, SENZA VIBRAZIONI



GAMMA DI
FRESATRICI
COMFORT M2

