

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



FRESCO CERAMICS

La Cultura Zirkonzahn

FRESCO GINGIVA E FRESCO ENAMEL

Con le nuove paste ceramiche Fresco Gingiva e Fresco Enamel, la stratificazione nelle zone gengivali e vestibolari di strutture in zirconia monolitiche o leggermente ridotte diventa ora molto più semplice e veloce. Specialmente nella zona gengivale, la caratterizzazione con stain non è più necessaria: la sola pasta ceramica è sufficiente per ottenere una gengiva dall'aspetto totalmente naturale.

Rispetto alle ceramiche convenzionali, le ceramiche Fresco rimangono umide per un tempo molto più lungo e possono essere modellate per diverse ore. La consistenza delle ceramiche può essere ulteriormente personalizzata aggiungendo i due liquidi di miscelazione Fresco Liquid e Fresco Gel, a seconda del metodo di lavoro preferito. Grazie alla loro elevata densità primaria, le ceramiche presentano una contrazione molto bassa. Per questo motivo, un solo ciclo di cottura (cottura n. 2 dei Fresco) con la ceramica Fresco è sufficiente per finalizzare la forma del dente e della gengiva dopo la prima cottura (cottura n. 1 dei Fresco). Con questo metodo di cottura, è possibile cuocere simultaneamente strutture in zirconia di diverse dimensioni. Non è quindi necessario modificare parametri come il tempo di mantenimento e/o la temperatura: gli unici parametri da adattare sono i tassi di riscaldamento e di raffreddamento, in quanto sono direttamente associati alla dimensione e alla massa della struttura in zirconia.

Un'eventuale cottura di correzione può essere effettuata adottando gli stessi parametri. Questo significa che si possono ottenere risultati stabili con un ciclo di cottura molto semplice ma efficiente.



MAGGIORI
INFORMAZIONI




100% PASSIONE ARTISTICA

Odt. Alexander Lichtmanegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige, Italia



Double Screw Metal

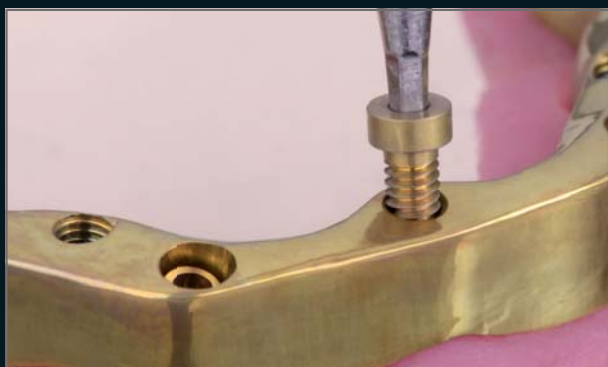

FRESCO CERAMICS

LA NUOVA ARTE DELLA STRATIFICAZIONE

- *Paste ceramiche per la stratificazione delle aree gengivali e vestibolari*
- *Per le strutture in zirconia monolitiche o leggermente ridotte*
- *Riproduzione naturale della gengiva solamente con Fresco Gingiva; l'applicazione di stain non è necessaria*
- *Proprietà di modellazione eccellenti grazie alla consistenza pastosa, che può essere ulteriormente personalizzata aggiungendo Fresco Liquid e Fresco Gel*
- *Bassa contrazione grazie all'alta densità primaria e al controllo efficiente della cottura*
- *Spettro cromatico: Fresco Gingiva da 1 a 6, Fresco Enamel Fluo, Opal, Transpa 3, Transpa Neutral, Transpa Orange e Transpa Grey*



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NUOVO

SET FRESCO ESSENTIAL

OPZIONALE:

*Fresco Enamel Transpa Orange e
Fresco Enamel Transpa Grey*



WEAB53781T=