


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology

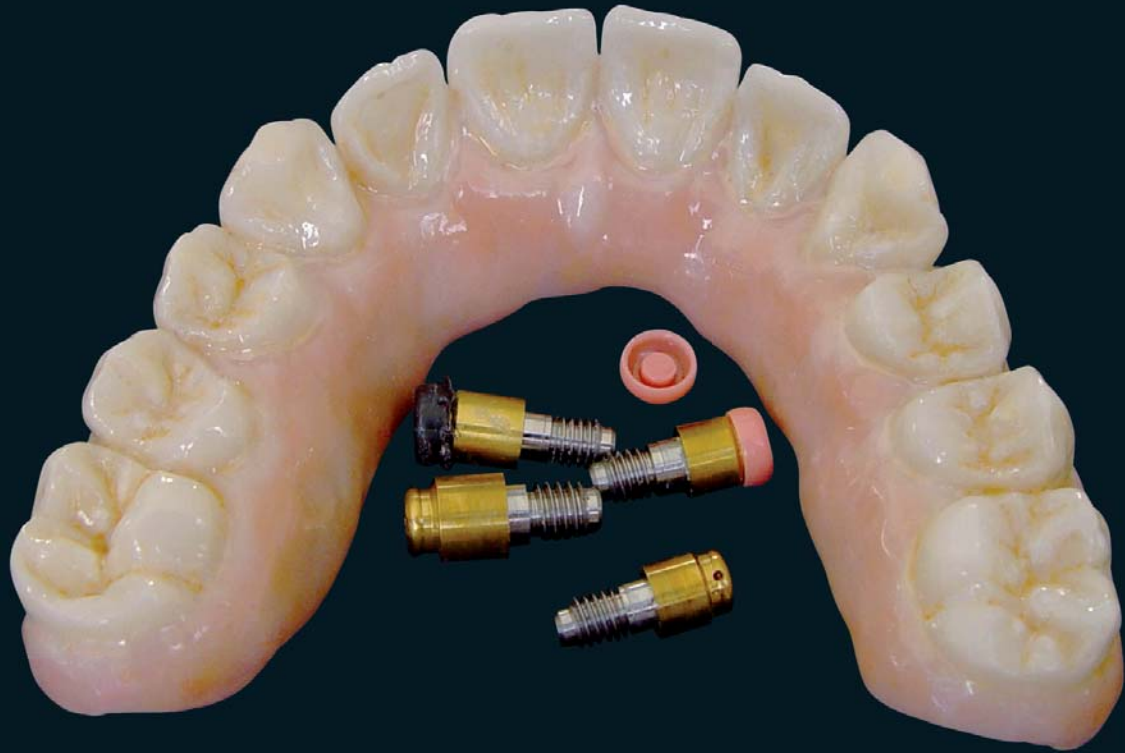

ALL ZIRCONIA

Protesi realizzate con tecniche ibride: Telescopio su impianti con zirconia Prettau e ponte over/denture su impianti...

Ricostruzione protesica modulare


Il caso prevede una riabilitazione totale del mascellare e del mandibolare con l'ausilio degli impianti. La protesi superiore è su quattro impianti (Locator – Camlog), realizzati in ZrO_2 , mentre la protesi inferiore prevede una riabilitazione totale su quattro telescopi ibridi, di cui due su impianti, e due su attacchi TK1 attivabili. Le protesi, così realizzate, garantiscono non soltanto un ottimo risultato, ma anche una eccellente possibilità di pulizia e tutto questo, per il paziente, è confort. Su questi lavori il rivestimento stratificato si limita esclusivamente alla gengiva in ceramica il cui corpo è stato realizzato in fresatura dall'unico pezzo in ZrO_2 . Le foto illustrano il caso finito mettendo in risalto i supporti telescopici, le matrici Locator, e lo stabile appoggio in zirconia integrale sulla gengiva.



Risultato finale dei ponti Prettau estraibili

ZTM Alexander Kanotscher, Austria

Troverete l'intero decorso in www.zahnprofi.at

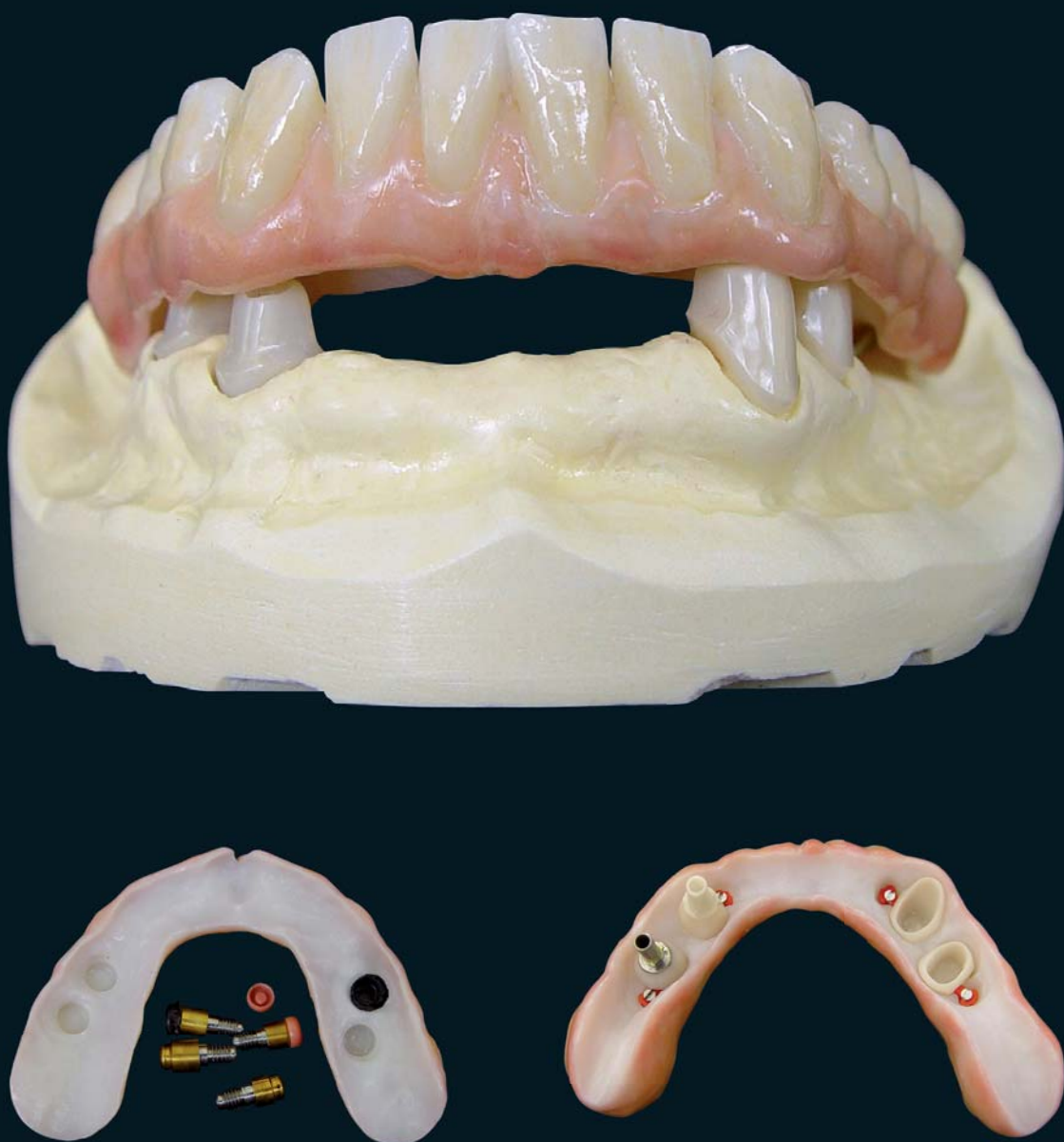

Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Fresato con il sistema di fresatura Zirkonzahn