


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



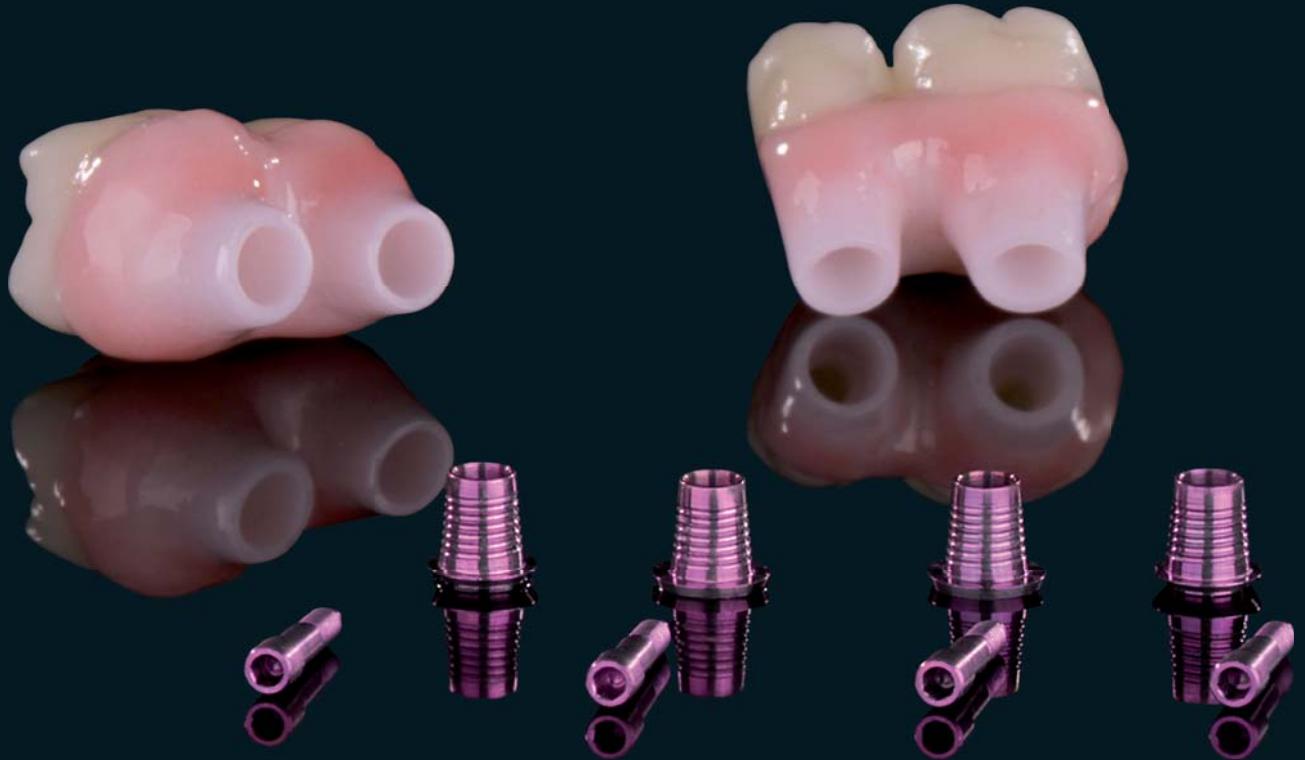


100% ZIRCONIA PRETTAU® – MADE BY CAD/CAM

“La zirconia ha bisogno di eroi” Enrico Steger

Ponte segmentato in Prettau® su impianti per il mascellare superiore e abutment in zirconia individuali

A causa della scarsa disponibilità iniziale di sostanza ossea nel settore anteriore superiore, nel caso clinico considerato gli impianti hanno dovuto essere inseriti con un'inclinazione sfavorevole in direzione vestibolare. I canali per le viti sono quindi risultati rivolti in direzione labiale; per questo motivo è stato deciso, in accordo con l'odontoiatra, di realizzare abutment in zirconia individuali. Gli abutment sono stati fissati alle basi in titanio Zirkonzahn e anodizzati nel colore della gengiva per garantire un passaggio armonioso dall'estetica bianca a quella rosa. In seguito sono state pianificate le sovrastrutture. Nel settore posteriore, sui denti 15-16 e 25-26 sono stati progettati due ponti monolitici, avvitabili dal lato oclusale, mentre per il settore anteriore è stata realizzata una struttura da rivestire in ceramica e da cementare intra oralmente con gli abutment individuali. Dopo la fresatura, le strutture in zirconia sono state colorate individualmente con Colour Liquid Prettau® Aquarell e ultimate dopo la sinterizzazione con la ceramica ICE Zirkon e i Colori da pittura ICE Zirkon 3D by Enrico Steger.

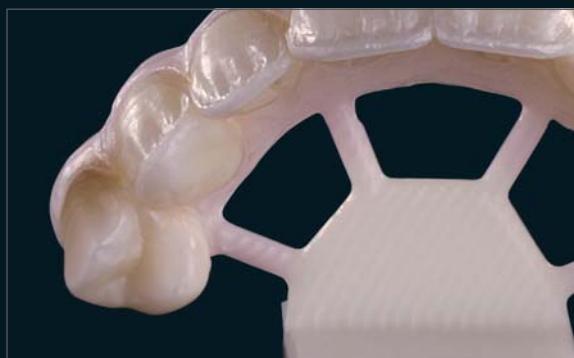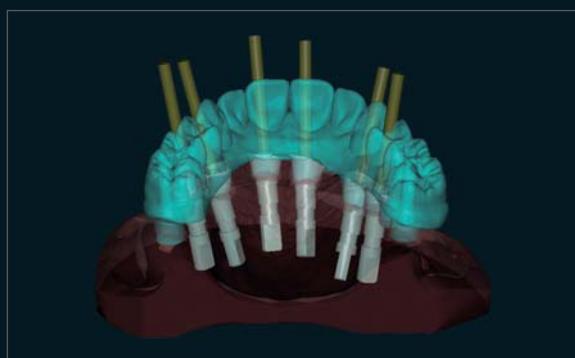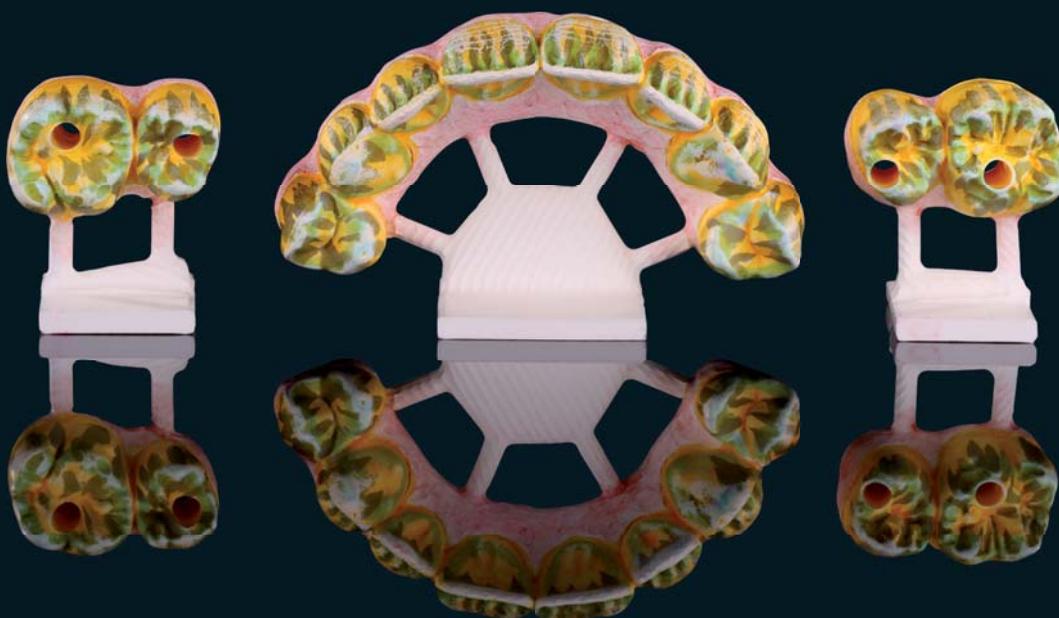

Prettau® Bridge

Prof. Dr. Wael Att – Clinica universitaria di Friburgo, Germania

Manfred Pörnbacher – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige



Zirkonzahn®


DATE DELLE
CONFERENZE DI
**ENRICO
STEGE**
.....
WWW.ZIRKONZAHN.COM



Fresato con il sistema CAD/CAM 5-TEC

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

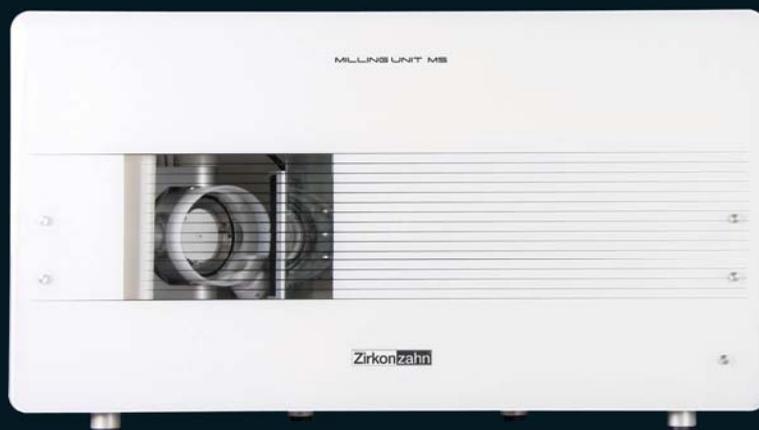

WEAA5854=

Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 18/02/2015