

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology




ALL ZIRCONIA

Einfärben des Rohlings

Nach erfolgter Fräsung wurde das Gerüst aus dem Zirkonblock herausgetrennt, im labialen Bereich verschliffen und lingual ein Standfuss belassen.

Mit individuellen Färbeflüssigkeiten (Color Liquid, Zirkonzahn) wurde nun das noch poröse Zirkon eingefärbt, wobei auf eine scharfe Abgrenzung zwischen Zahnfleisch- und Zahnfarbe zu achten war. Das eingefärbte Gerüst wurde daraufhin 60 Minuten unter einer Trockenlampe getrocknet und anschließend aufrecht in den Zirkonofen gestellt.

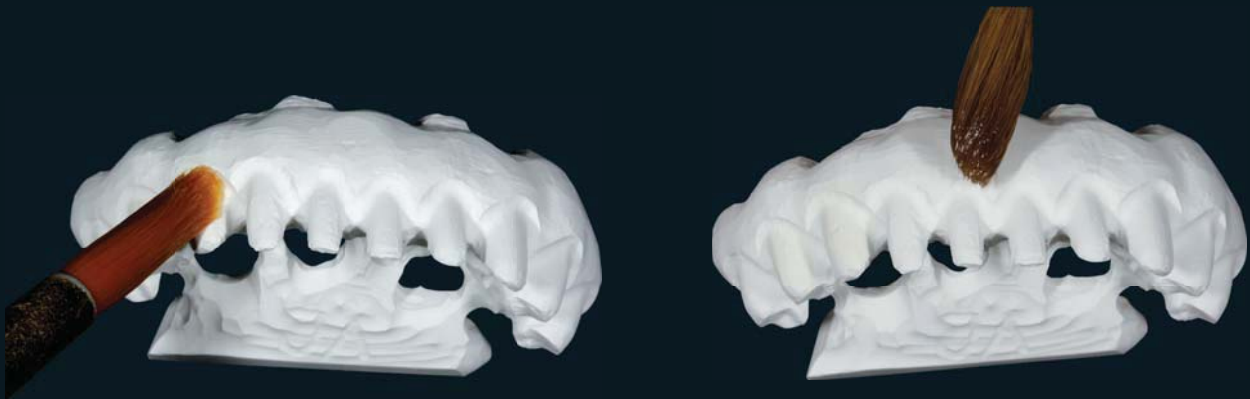

Ergebnis nach dem Sintern

ZTM Jürgen Auffarth, Salzburg



Zirkonzahn[®]



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Gefräst mit Zirkonzahn Frässystem