

# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*



**ALL ZIRCONIA**

## *Restauration auf sechs Implantaten*


Ausgangssituation: Bei einem Patienten mit stark vorgelagertem Oberkiefer ist vorgesehen, die Zahnreihe dorsal zu versetzen. Aufgrund der starken Retropositionierung ist das Anwenden von eingefärbtem Zirkon vorteilhaft und vereinfacht das Herstellen des Gerüsts, bei dem sich die Schraubenkanäle im bukkalen Bereich vor den Zähnen befinden. Dieser Bereich wurde mit rosafarbener ICE Zirkon Keramik Tissue verblendet. Die Schraubenkanäle wurden dann mit rosafarbenem Composite Material (Gradia, GC) verschlossen.

Da sich der Schraubenzugang in ungünstiger Position befand, wurden über die beiden Eckzähne verblendete Einzelkronen zementiert.



## *Restauration auf sechs Implantaten*

Zahntechnisches Labor Antonio Lazetera, Italien - Dr. Andrea Damiola, Italien

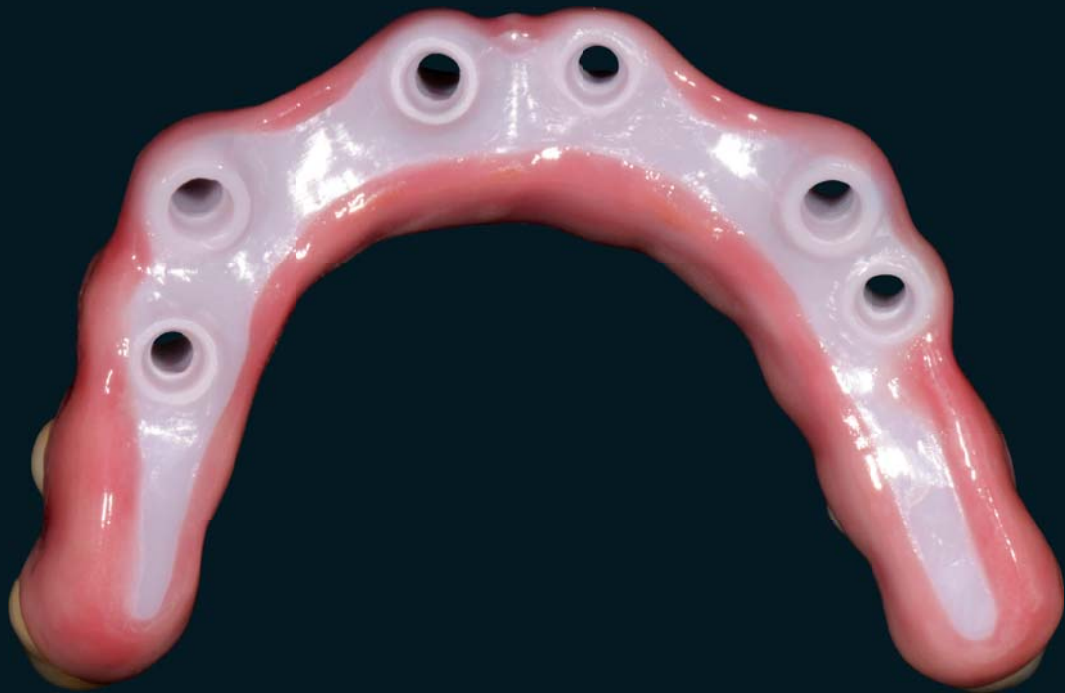


# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)

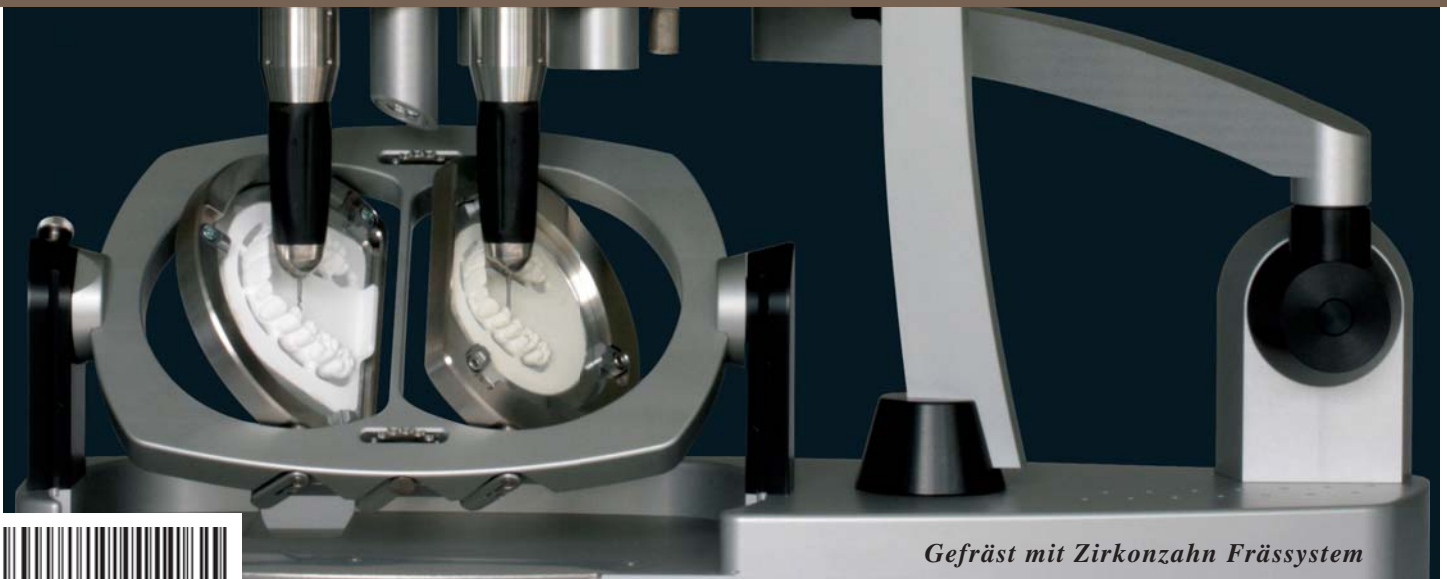

*Gefräst mit Zirkonzahn Frässystem*



WEAA5311=