


# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*

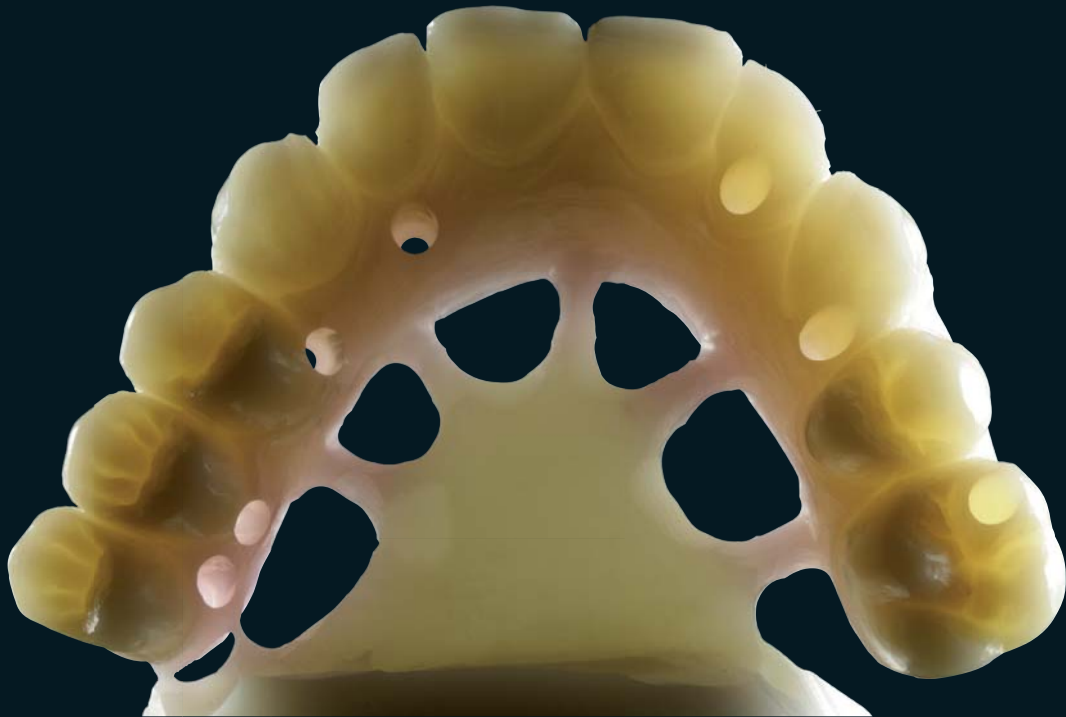

**100% PRETTAU ZIRKON**

## *Prettau Zirkon - 2 Vollzirkonbrücken*

Die Einfärbetechnik ist ausschlaggebend für eine dreidimensionale Farbwirkung und ein naturidentisches Ergebnis. Mittels Prettau-Einfärbetechnik wurde zunächst der Zahnbereich und dann das Zahnfleisch coloriert. Im Frontzahnbereich wurden die Prettau Intensivfarben Incisal grey, Incisal violet sowie das Colour Liquid Fluoreszenz verwendet. Vor der Keramikschichtung wurde auf das Gerüst zunächst eine dünne Dentinschicht aufgetragen. Für ein natürliches Aussehen des Zahnfleisches sollte bei der Gingiva-Schichtung ein möglichst breites, abwechslungsreiches Farbspektrum zur Anwendung kommen. Die Frontzähne wurden im Anschluss labial lediglich mit einer dünnen Schmelzschicht verblendet. Der Gingiva-Bereich sollte gleichzeitig mit dem Labialbereich geschichtet werden. Eine manuelle Politur verleiht der fertigen Arbeit abschließend den letzten natürlichen Schliff.



## *Die Prettau Bridge*

Jürgen Auffarth, Österreich

In Zusammenarbeit mit ZTM Christian Hannker, Dentallabor Bellmann & Hannker (Deutschland)




# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)

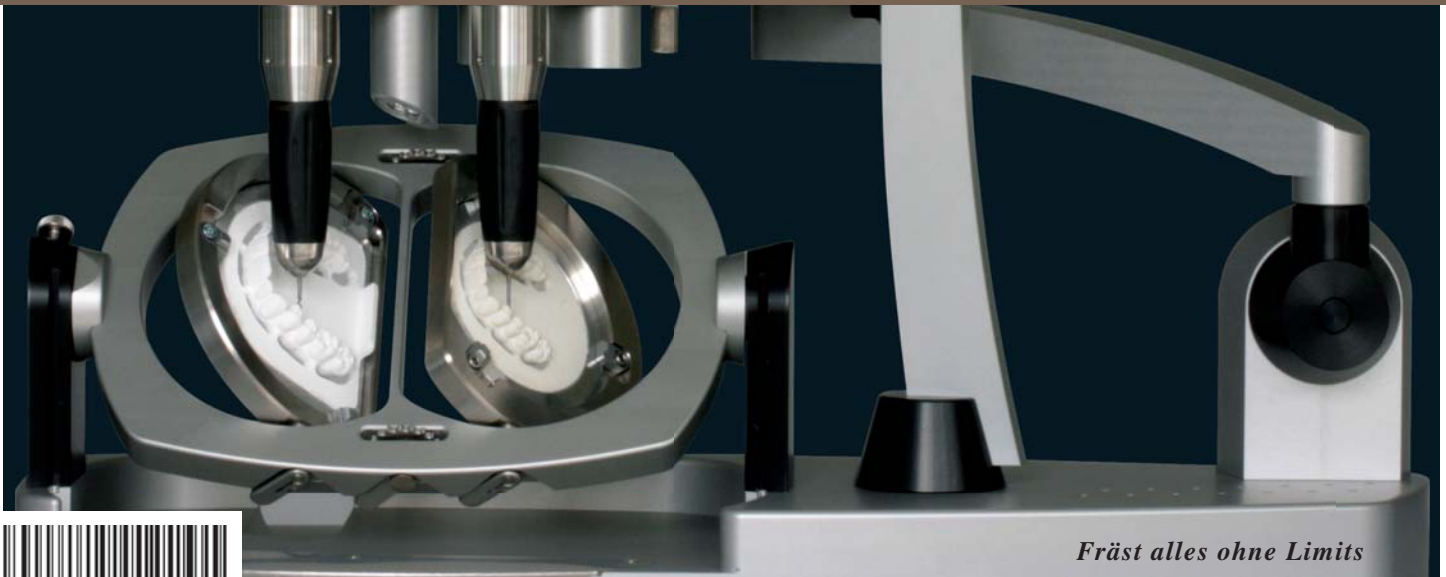

*Fräst alles ohne Limits*



WEAA5315=