

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® 2

Die Zirkonzahn Kultur


IMPLANTATGETRAGENE ZIRKONRESTAURATION AUS PRETTAU® 2 IM OBERKIEFER

Ausgangssituation:

Patientin mit bereits sechs Implantaten, versorgt mit einer nicht zufriedenstellenden Oberkieferrestauration

Realisierung:

- *Abdrucknahme und Bissregistrierung mit vorhandener Restauration*
- *Design eines implantatgetragenen Provisoriums in der Software Zirkonzahn.Modellier sowie eines Titansteges zur Stabilisierung*
- *Fräsen des Provisoriums aus Kunststoff Prime, Verblendung mit Gingiva-Composites und friktive Eingliederung auf dem Steg im Patientenmund*
- *Nach positiver Beurteilung des Provisoriums durch den Behandler und die Patientin wurde die finale Zirkonversorgung basierend auf dem Provisorium in der Software Zirkonzahn.Modellier modelliert*
- *Positionieren der endgültigen Restauration im Zirkonblank Prettau® 2 in der Software Zirkonzahn.Nesting und anschließendes Fräsen mit dem Fräsgerät M2 Teleskoper*
- *Vorinfiltration der Schneidekante mit Colour Liquid Waterbased Verdünner zur Generierung eines natürlichen Farbverlaufs, Einfärbung des Zirkons mit Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell 0M2 und Akzentuierung mit Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensivfarben*
- *Verblendung der Gingiva mit Fresco Ceramics, Charakterisierung mit ICE Stains 3D Blue Lightning by Enrico Steger und Glasierung mit ICE Stains 3D Base Glaze*
- *Goldfarbenes Anodisieren des Steges und Verklebung mit der Zirkonrestauration*

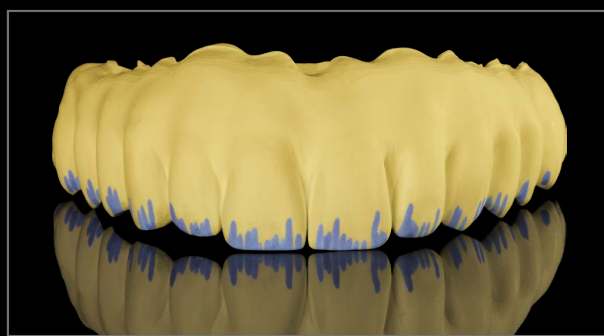

100 % ÄSTHETIK, NUR IM GINGIVABEREICH VERBLENDET

Dr. Harel Simon – Beverly Hills, USA

ZTM Marco Heidel – Zirkonzahn Education Center Bruneck, Südtirol, Italien

ZT Bart Ziengs – Zirkonzahn Education Center Bruneck, Südtirol, Italien





NEU! PRETTAU® 2

- Besonders hochtransluzentes Zirkon mit außerordentlicher Biegefestigkeit
- **Keine Limitationen!** Besonders geeignet für zirkuläre Brücken (monolithisch oder reduziert zur Verblendung mit Keramik), aber auch für Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, Stege und mehrgliedrige Brücken verwendbar
- Kein Keramikchipping (durch monolithische Gestaltung), keine Abrasion gegenüber dem Antagonisten
- Patientenindividuell charakterisierbar mit Colour Liquids Prettau® 2 Aquarell, Keramik ICE Ceramics, Fresco Ceramics sowie Malfarben ICE Stains 3D by Enrico Steger
- Als Prettau® 2 Dispersive® auch voreingefärbt mit natürlichem Farbverlauf erhältlich



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NEU! 1 ORBIT – 4 DURCHMESSER

125, 106, 98 UND 95 MM

FRÄSGERÄT-KOMFORTLINIE M2 MIT EXTRAGROSSEM WECHSELORBIT
TELESKOPER. VOLLAUTOMATISCH, FLEXIBEL, VIBRATIONSFREI



FRÄSGERÄT-
KOMFORTLINIE
M2



WEAB2695DE=