

Zirkonzahn®





INTELLIGENTE LÖSUNGEN

Die Zirkonzahn Kultur

INTELLIGENTE LÖSUNGEN BEI DIVERGIERENDEN IMPLANTATEN

Bei vollständiger Zahnlosigkeit ist eine steggestützte Versorgung die beste Lösung. Diese Art von Restauration gilt jedoch aufgrund verschiedener Faktoren als eine der schwierigsten, besonders in Fällen von divergierenden Implantaten.

Wir haben für diese Problematik vier Lösungen entwickelt, die eine Balance zwischen Funktion, Stabilität und Ästhetik gewährleisten, sodass auch bei zahnlosen Patienten mit divergierenden Implantaten hochwertige Versorgungen hergestellt werden können.

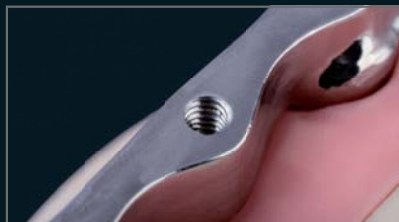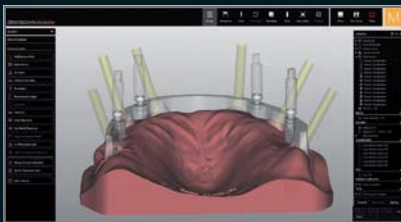


DOUBLE SCREW BAR

- *Spezielle Funktion, bei der mit der Software Zirkonzahn.Modellier zusätzliche Schraubengewinde im Stegdesign generiert werden*
- *Virtuell generierte Schraubengewinde werden während des Fräsvorgangs mit in den Steg gefräst*
- *Der Steg wird mit den Implantaten verschraubt und die Sekundärstruktur auf dem Steg*
- *Verhindert unästhetische vestibuläre Schraubenkanäle*




BARTPLATTE

- *Innovatives Stegdesign, das bei palatinal gesetzten Implantaten die Herstellung von grazilen Versorgungen ermöglicht*
- *Mit der Advanced-Funktion im Software-Modul CAD/CAM Stege der Software Zirkonzahn.Modellier wird der Steg geometrisch an die palatinale Fläche des Wax-ups angepasst und durch Freiformen individualisiert*
- *Mit dem Software-Modul CAD/CAM Geschiebe können zusätzliche Retentionen am Steg generiert werden*

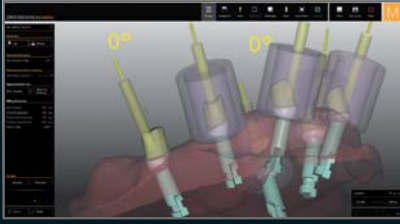

INDIVIDUELLE RAW-ABUTMENTS®

- Vorgefertigte Abutmentrohlinge aus einer hochwertigen medizinischen Titanlegierung (Ti-6Al-4V ELI nach ASTM F136 und ISO 5832-3) zur Herstellung von individuellen Abutments
- Industriell vorgefertigter Implantatanschluss garantiert höchste Passgenauigkeit
- Ausgleichen von Implantatdivergenzen durch frei gestaltbare Abutmentgeometrie möglich; vestibuläres Austreten der Schraubenkanäle wird verhindert
- Mit Titanium spectral-colouring Anodizer verschiedenfarbig (z. B. goldfarben) anodisierbar

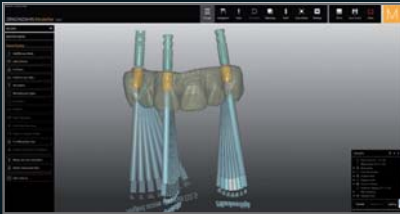

TITANBASEN K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

- Besitzen einen hohen Kamin, um eine optimale Stabilisierung und Kräfteverteilung der Rekonstruktion zu gewährleisten; Kaminhöhe an Zahnlänge anpassbar
- Mit seitlicher Schraubkanalöffnung versehen, um den Schraubenzugangskanal von 0°-30° zu angulieren und so nicht optimale Implantatpositionen auszugleichen
- Mit oder ohne rotationsgesicherten Implantatanschluss und mit zusätzlicher Rotationssicherung am Kamin, damit sich die aufzementierte Versorgung nicht verdreht
- Alle Titanbasen von Zirkozahn sind auch in einer hochwertigen Vergoldung erhältlich, können aber alternativ auch mit dem Titanium spectral-colouring Anodizer verschiedenfarbig anodisiert werden



VIDEOS
ANSCHAUEN



FALLGALERIE
DOUBLE
SCREW BAR



FALLGALERIE
BARTPLATTE



FALLGALERIE
RAW-ABUTMENTS®



KOMPONENTEN DIREKT IN
ZIRKONZAHN-MODELLIER
BESTELLEN



HOCHWERTIGES VON ZIRKONZAHN

IMPLANTATPROTHETISCHE KOMPONENTEN – ALLES AUS EINER HAND
MIT BIS ZU 30 JAHREN GARANTIE



White Metal Scanmarker:
Zur Erfassung der Position
und der Ausrichtung des
Implantats, während
Intraoral- oder Modellscans

**Titanbasen K80 Angled Screw
Channel (ASC):** Der hohe Kamin
individuell an die Zahnlänge angepasst
werden und der Schraubenzugangskanal
kann von 0°–30° anguliert werden



Zirkonzahn LOC-Connector:
Verankerungssystem für Implantate und
Stege zur Fixierung von herausnehmbarem
Zahnersatz auf Implantaten

**Zirkonzahn Multi Unit
Abutments 17°:** Ausgestattet
mit einem Winkel von 17°,
um damit Neigungen der
Implantate auszugleichen
und erhältlich mit
zwei unterschiedlichen
rotationsgesicherten
Anschlussstypen



Titanbasen K85: Besitzen
einen hohen Kamin,
der individuell an die
Rekonstruktion angepasst
werden kann

***NEUE KOMPONENTEN FÜR EIN NOCH GRÖßERES ANGEBOT!**



ZIRKONZAHN LIBRARY DOWNLOAD CENTER

Auch exocad®- und 3Shape-Nutzer können mit dem kostenlosen **Zirkonzahn Library Download Center** Zirkonzahn Implantatkomponenten in die eigene Modelliersoftware herunterladen und verwalten

Dieses Dokument ist für ein internationales Publikum bestimmt. Nicht alle der genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Der Anwendungsbereich des Produkts kann je nach Land variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihr Verkaufsteam, um nähere Informationen zu erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 27.05.2022



WEAB3527DE=