

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ZIRCONE PRETTAU

Zircone Prettau

Les bridges Prettau peuvent également être modelés de manière partiellement anatomique. Dans ce cas, ce que l'on stratifierait normalement en dentine est fraisé en zircone Prettau. L'avantage évident est que la dent n'est revêtue que par une fine couche d'émail. Cela entraîne une économie de temps, augmente la résistance totale du bridge et réduit presque complètement les fêlures dans la céramique.

Le bridge est coloré individuellement avant frittage avec les Prettau Colour Liquids et ensuite fritté. Le bridge fritté n'est ensuite revêtu que par des masses d'émail de différentes couleurs d'une épaisseur d'environ 0,3-0,5 mm. Il faut veiller à ce que tout le bridge soit recouvert d'une couche d'émail. On atteint ainsi un très bel effet de profondeur.

Grâce à l'excellente translucidité de la zircone Prettau on obtient exactement le même résultat que si le bridge avait été stratifié de façon habituelle, avec de la dentine et des masses incisales.



Zircone Prettau

Aldo Zilio, Italie



Armature en dentine de 100% zircone Prettau




Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRCONLAB - Yves Probst - Tel +33 388 69 55 44 - zirconlab@wanadoo.fr - www.zirconlab.com

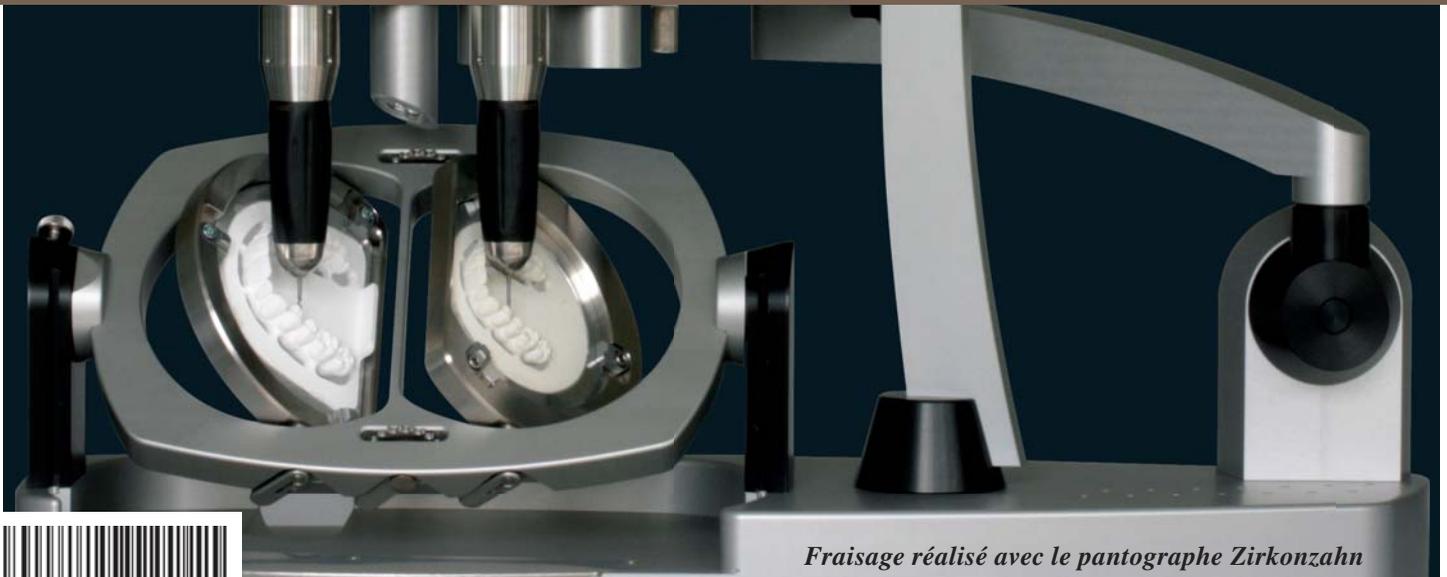

Fraisage réalisé avec le pantographe Zirkonzahn



WEAA5705=