


# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*

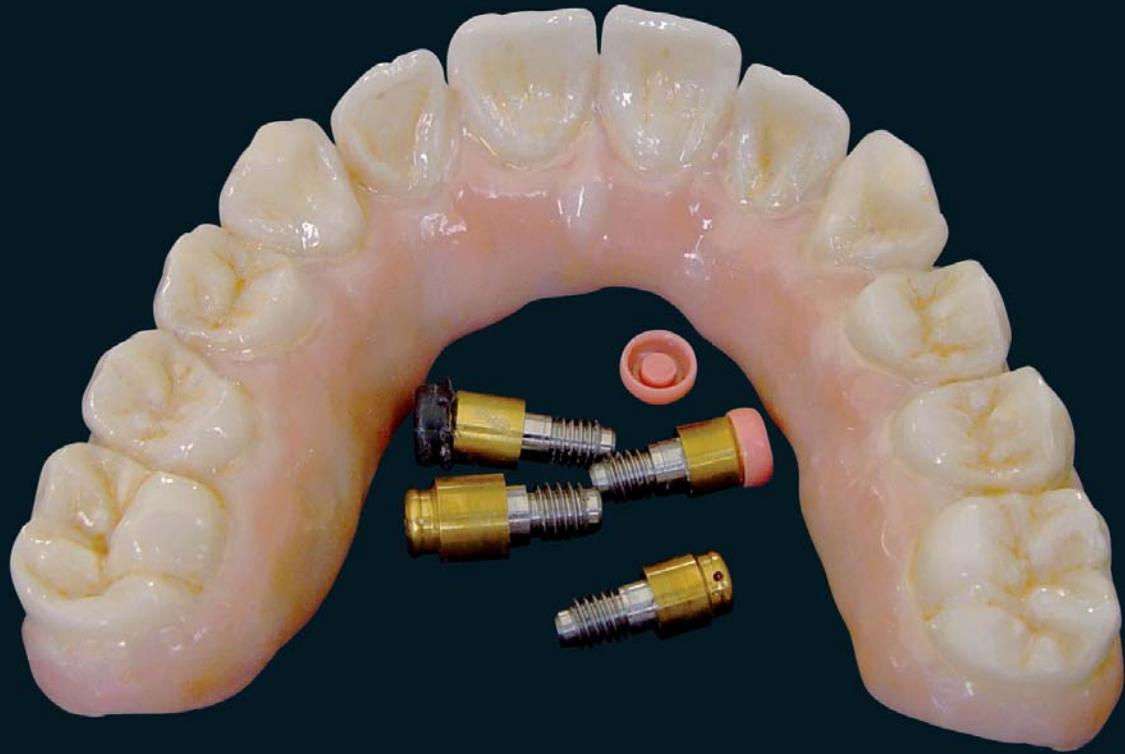

**TOUT ZIRCONE**


## *Prothèses combinées « tout zircone »*

Grand confort en bouche et grande facilité de nettoyage pour le patient:

Au maxillaire : bridge « Prettau » sur 4 implants  $ZrO_2$ , avec piliers prothétiques Locator® (Camlog)

A la mandibule : bridge « Prettau » sur 4 télescopes hybrides (dont 2 sur implants), avec attachements activables TK1.

L'étape de recouvrement esthétique concerne uniquement les parties gingivales, lesquelles ont été fraisées en même temps. Les illustrations ci-dessous vous montrent les logements des télescopes, les piliers et parties femelles Locator®, ainsi que les intrados des prothèses, garants d'une assise homogène de celles-ci sur la gencive du patient.

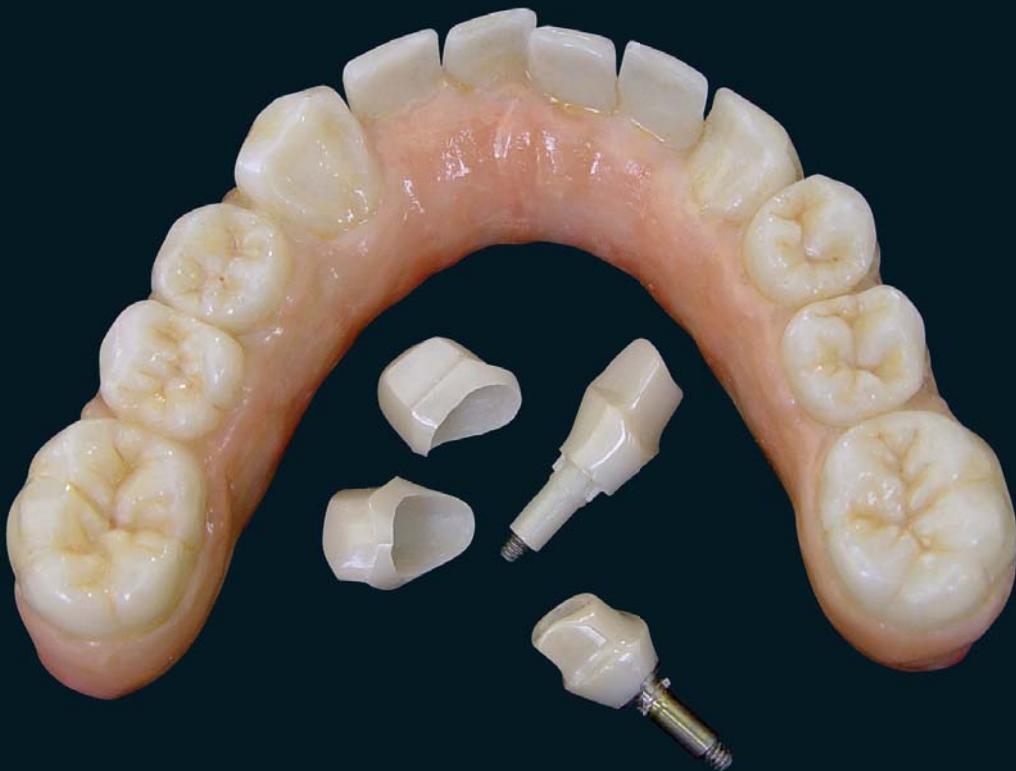

## *Le résultat final (bridges amovibles « Prettau »)*

Travail réalisé par le prothésiste autrichien Alexander Kanotscher

Pour plus de détails sur les étapes de réalisation de ces prothèses : [www.zahnprofi.at](http://www.zahnprofi.at)




# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRCONLAB - Yves Probst - Tel +33 388 69 55 44 - zirconlab@wanadoo.fr - www.zirconlab.com

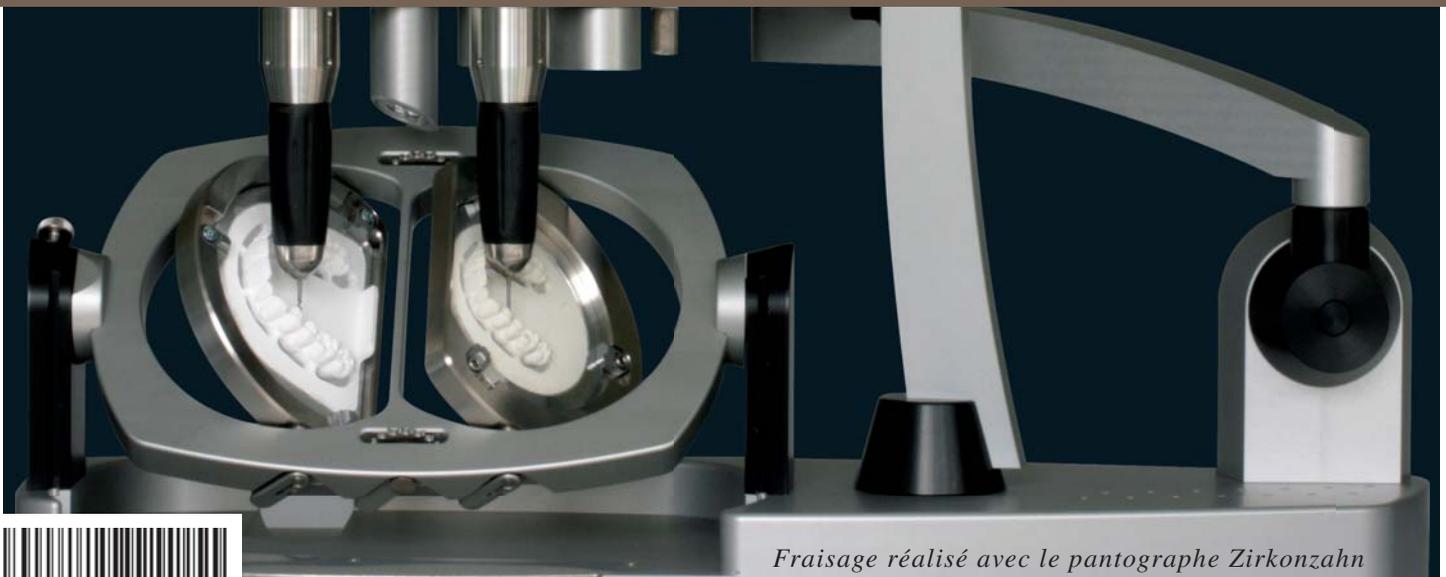

WEAA5706=

*Fraisage réalisé avec le pantographe Zirkonzahn*