

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® SKIN®

LA CULTURE ZIRKONZAHN


FACETTES PRETTAU® SKIN® « NO PREP » EN ZIRCON PRETTAU® 4 ANTERIOR® DISPERSIVE®

Données disponibles : Photos en 2D, données de scannages intra-oraux

Restauration prévue : Restauration esthétique et fonctionnelle de la région antérieure (13–23) avec des facettes Prettau® Skin® ultrafines, appliquées sans aucune préparation des dents (no-prep)

Réalisation :

- Détermination de la couleur des dents du patient avec le teintier Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line
- Dans le logiciel Zirkonzahn.Modifier, montage virtuel et personnalisation de l'ensemble des anatomies dentaires SERAPHIM de la bibliothèque virtuelle Heroes Collection
- Sélection de la direction d'insertion optimale pour fabriquer un modèle block-out
- Conception d'un mock-up et fraisage en résine Temp Premium Flexible avec la fraiseuse M6 Teleskoper Blank Changer
- Essayage du mock-up dans la bouche du patient pour évaluer les aspects fonctionnels, phonétiques et esthétiques, et pour fournir au patient une première visualisation du résultat final possible
- Conception de six facettes Prettau® Skin® et fraisage à partir du bloc en zircon Prettau® 4 Anterior® Dispersive®
- Frittage des facettes dans le four de frittage Zirkonofen Turbo ; ensuite, caractérisation avec les ICE Stains 3D by Enrico Steger et stratification minimale avec les Fresco Ceramics
- Cimentation des restaurations finalisées dans la bouche du patient et fabrication d'une gouttière en Therapon Transpa pour protéger les facettes

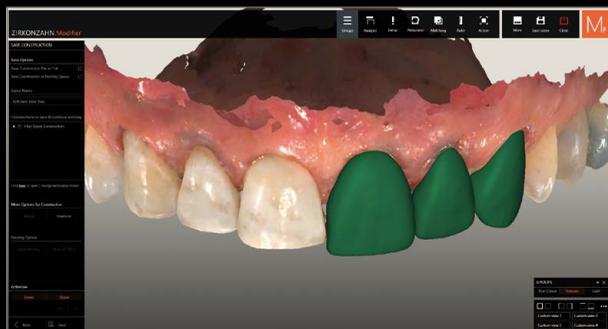

100 % FONCTION ET ESTHÉTIQUE GRÂCE À UN TRAITEMENT NON-INVASIF

Dr. med. dent. José Carlos Alva Manríquez – León, Mexique

Proth. Dent. Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tyrol du Sud, Italie





PRETTAU® 4 ANTERIOR® DISPERSIVE®

- Zircon avec une translucidité très élevée et un gradient de couleur naturel : la couleur est distribuée de manière uniforme pour un effet de « dispersion »
- Pour la fabrication de couronnes unitaires, inlays, onlays, facettes et bridges jusqu'à trois éléments (structures monolithiques ou réduites pour la stratification en céramique)
- Particulièrement adaptée pour la zone antérieure, mais peut être utilisée également pour les dents postérieures
- Pas d'écaillage de la céramique (grâce à la conception anatomique) ; pas d'abrasion de l'antagoniste
- Sur demande, caractérisation individuelle avec les couleurs intensives Colour Liquids Prettau® 4 Anterior® Aquarell, les ICE Ceramics, les Fresco Ceramics, les teintes maquillantes ICE Stains Prettau® et les ICE Stains 3D by Enrico Steger



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Rotec – Tél. +33 2 40 62 11 02 – Fax +33 2 40 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com

Zirkonzahn Worldwide – Tél. +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOUVEAU ! 1 ORBITE – 4 DIAMÈTRES (95, 98, 106 ET 125 mm)

POUR LA LIGNE CONFORT DE FRAISEUSES M2, LA FRAISEUSE M4 WET HEAVY METAL ET LA NOUVELLE FRAISEUSE M6 TELESKOPER BLANK CHANGER

