


Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



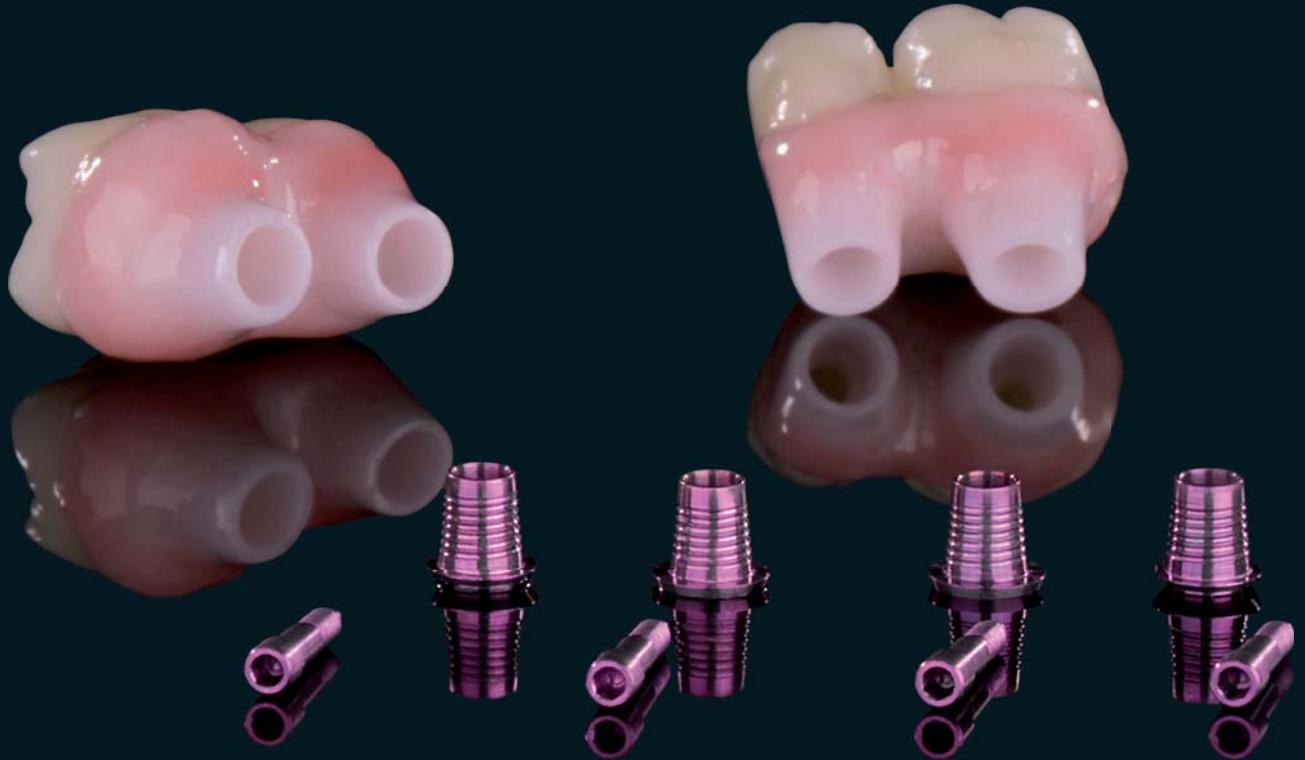


100% ZIRCONE PRETTAU[®] - MADE BY CAD/CAM

« La zircone a besoin de héros » Enrico Steger

Bridge maxillaire partagé en zircone Prettau® sur implants et piliers individuels en zircone

L'état osseux du patient examiné ici nous oblige à placer les implants du secteur antérieur mandibulaire en leur donnant une inclinaison défavorable du côté vestibulaire. Les canaux des vis sont donc tournés du côté vestibulaire, ce qui justifie la décision prise avec le chirurgien-dentiste de fabriquer des piliers en zircone individuels. Les piliers sont collés sur des bases en titane Zirkonzahn et anodisés à la couleur de la gencive pour garantir une transition harmonieuse avec celle-ci. Les superstructures sont ensuite planifiées. Deux bridges monolithiques à clivage occlusal sont construits pour les dents latérales 15-16 et 25-26. Dans le secteur antérieur, nous réalisons une structure à céramiser qui est collée en bouche sur les piliers individuels. Après le fraisage, les structures en zircone sont teintées individuellement avec les Colour Liquid Prettau® Aquarell, puis finies après le frittage avec ICE Zirkon Céramique et des Teintes maquillantes ICE Zirkon 3D by Enrico Steger.

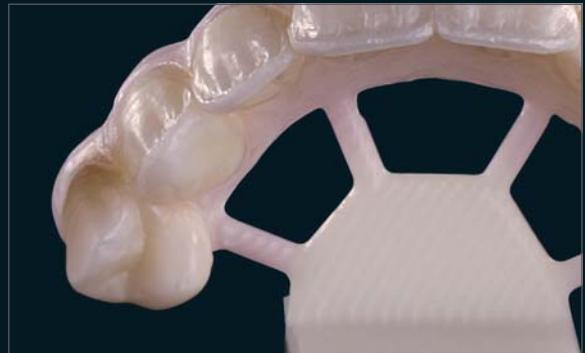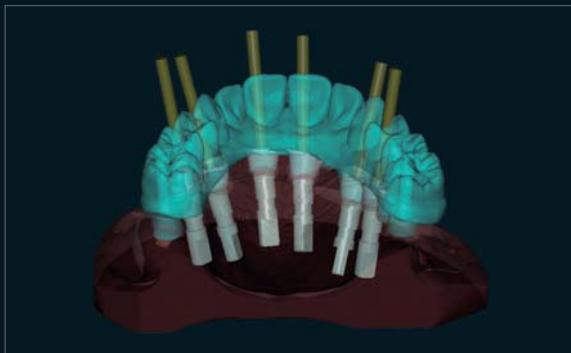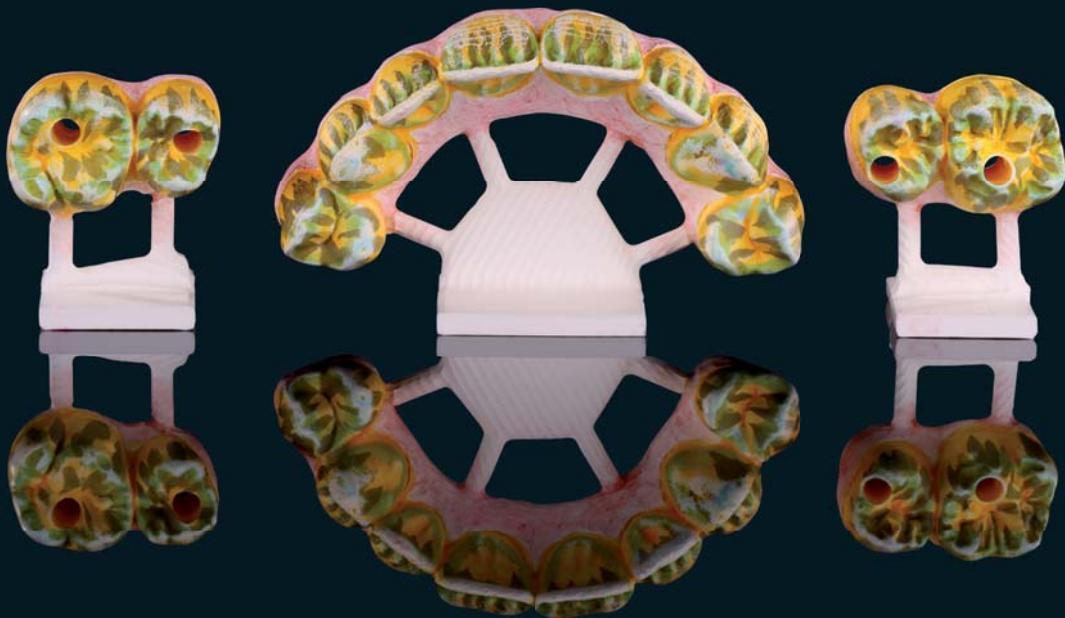

Le Prettau® Bridge

Prof. Dr. Wael Att – Clinique universitaire de Fribourg, Allemagne

Manfred Pörnbacher – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tyrol du Sud, Italie



Zirkonzahn®

**DATES DES
CONFÉRENCES
D'ENRICO
STEGER**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Fraisé avec le système de CFAO 5-TEC

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

ZIRKONZAHN France – 32, Rue du 22 Novembre – 67080 Strasbourg – Tel +33 388 23 30 97

ROTEC – Tel +33 240 62 11 02 - Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec.fr



WEAA5754=

Toutes les informations sont susceptibles de modifications. Sauf erreur ou omission. Version: 18/02/2015