


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology

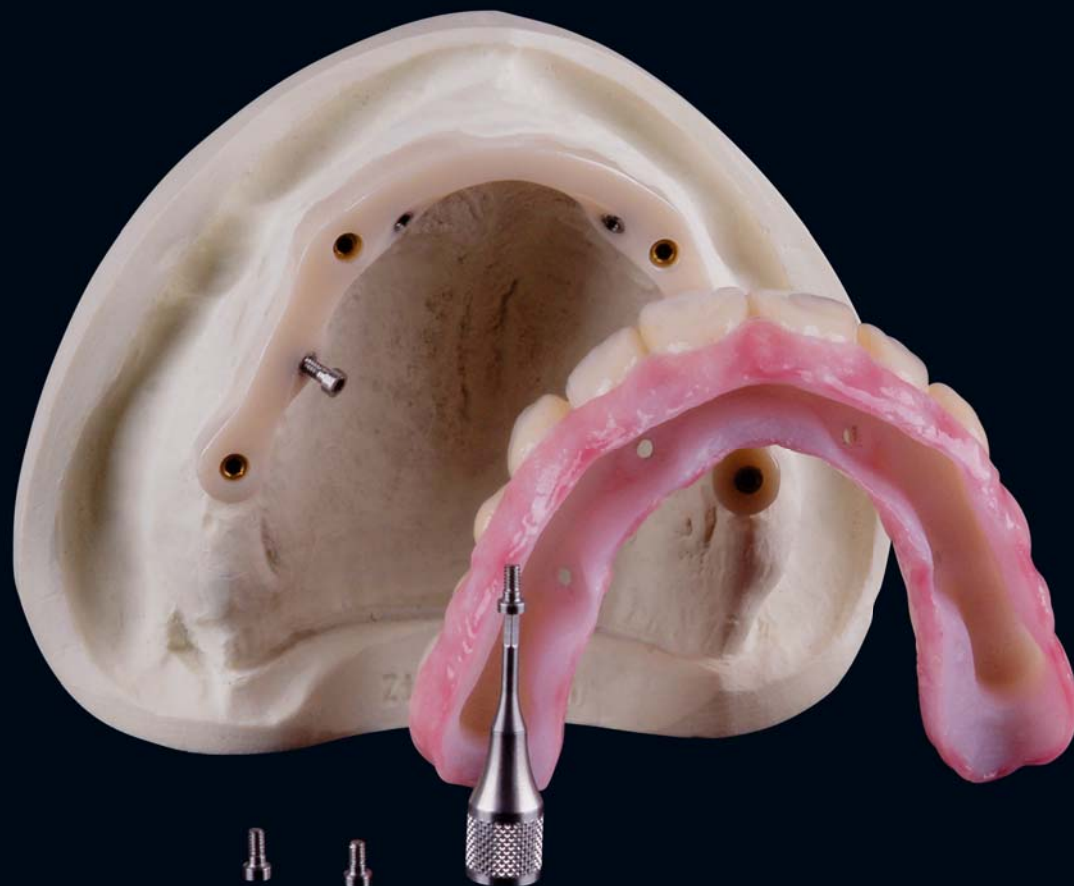

100% ZIRCONIA PRETTAU

Prettau Bridge

Nei quattro impianti posti nella zona dei denti laterali si doveva realizzare una struttura a barra con protesi estraibile.

Innanzitutto è stato realizzato un pilastro circolare a barra, fissato con quattro viti. La struttura a barra è stata fresata in zirconia con una fresa diamantata 1, quindi rifinita sul parallelometro e lucidata a specchio. Sono state, inoltre, inserite quattro viti nella barra, per l'eventuale fissaggio della struttura secondaria. Sia la struttura primaria che quella secondaria sono di zirconia al 100%. Abbiamo così ottenuto una frizione sorprendentemente buona.

Il manufatto è stato applicato senza avvitarlo secondario, cosa già prevista soltanto nel caso in cui la frizione dovesse diminuire.



Prettau Bridge

Dr. Rogelio Espinosa, Zirkonzahn Messico




Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

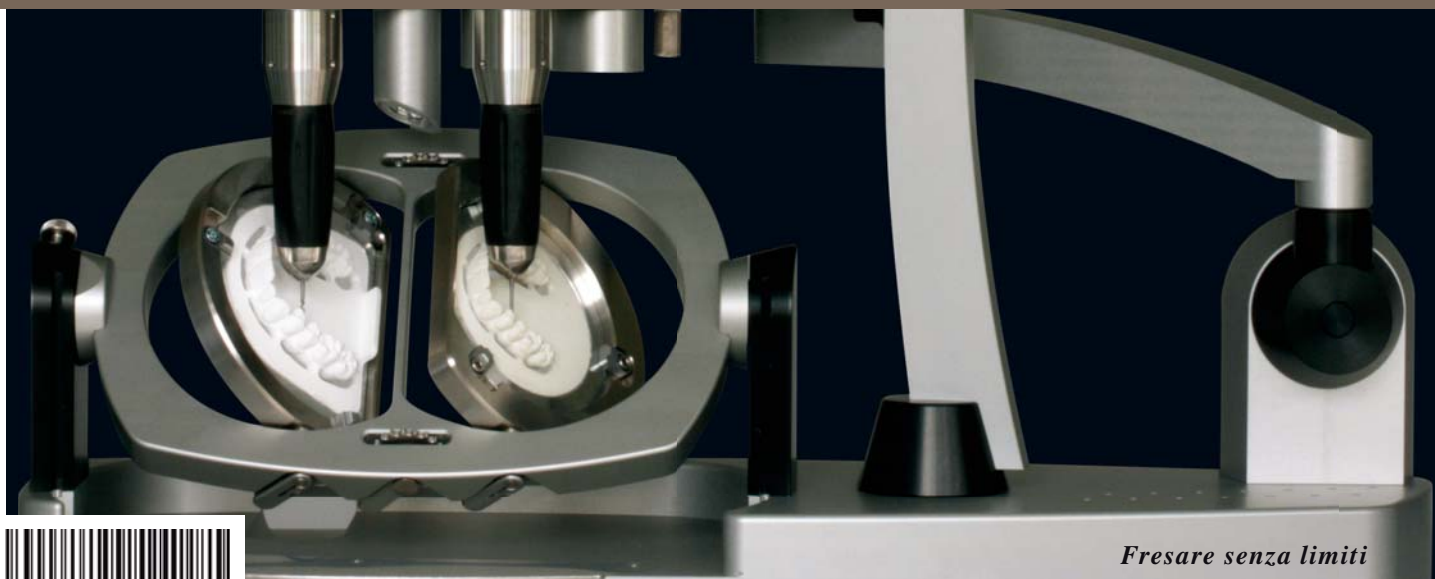

Fresare senza limiti



WEAA5813=