

Zirkonzahn®

I.P.

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM

„Zirconia necessita eroi“ Enrico Steger



Zirkonzahn World Wide



Zirkonzahn Germania



Zirkonzahn USA



Zirkonzahn Messico

Zirconia Prettau


Per ottenere risultati duraturi nei restauri con impianti dentali nella mascella superiore e inferiore è richiesta una grande solidità dei materiali. Questi ultimi sono sottoposti a maggiori sollecitazioni dovute alla mancanza di sensori propriocettivi e di conseguenza ad una maggiore forza di chiusura della bocca da parte del paziente. La Prettau zirconia, un materiale modificato del gruppo dello zirconio, soddisfa tali requisiti, conferendo ancor più stabilità. Tutte le zone che implicano l'occlusione e la funzione sono realizzate al 100% con questo materiale. Solamente le zone vestibolari dei denti anteriori sono ricoperte di ceramica e si mantengono liberi i bordi taglienti. L'elevata stabilità del materiale Prettau zirconia garantisce la resistenza all'usura ed evita la rottura dei bordi taglienti e delle cuspidi. Altrimenti, con i ponti ricoperti di ceramica integrale, sarebbe quasi impossibile evitare la rottura (Chipping).



Il Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spagna

Georg Walcher - Zirkonzahn Education Center

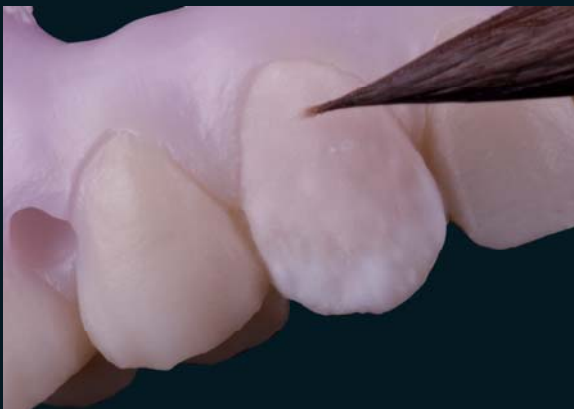

Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5823

Fresato con il Zirkonzahn sistema CAD/CAM 5-TEC