

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology

I.P.




100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM

„Zirconia necessita eroi“ Enrico Steger

Zirconia Prettau

Per dimostrare la funzionalità di questo tipo di costruzione, realizziamo ogni mese alcuni lavori di questo tipo in collaborazione con il Dr. Thomas Suranyi e il Dr. Lyondon F Cooper DDS PhD. Prima di realizzare il restauro definitivo, fresiamo il lavoro in resina che rimarrà nella bocca del paziente per un periodo di tempo necessario per permettere di controllare il fit, l'occlusione e l'estetica. Quando il paziente è contento e tutte le condizioni d'igiene sono soddisfatte, si può cominciare a realizzare il lavoro definitivo in zirconia Prettau tramite la tecnica della doppia scansione. Le parti vestibolari vengono in seguito stratificate e la gengiva realizzata in ceramica rosa. In questo modo, il risultato è un restauro stabile e durevole.

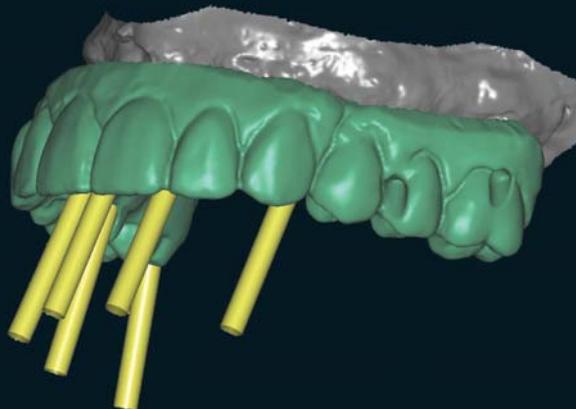

100% resina

Il Prettau Bridge

Dr. Thomas Suranyi e Lyndon F Cooper DDS PhD – University of North Carolina
Georg Walcher e Mauricio Cuéllar - Zirkonzahn Education Center




Zirkonzahn®



Fresato con il Zirkonzahn sistema CAD/CAM 5-TEC

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

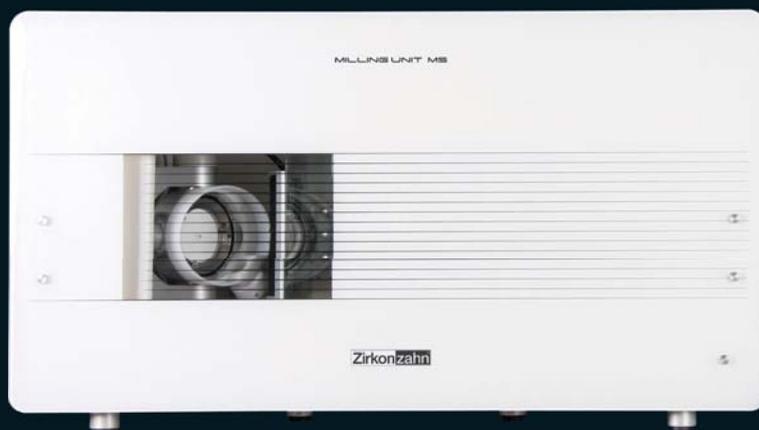

WEAA5828=

Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 15.07.2013