

Zirkonzahn®

I.P.

Human Zirconium Technology




100% ZIRCONIA PRETTAU® - MADE BY CAD/CAM

„Zirconia necessita eroi“ Enrico Steger

Zirconia Prettau®

La protesi superiore è stata cementata su 8 abutments con esagono esterno. Gli elementi 16-17 e 26-27 sono stati tenuti separati dal resto del lavoro per facilitare la cementazione e per garantire una migliore igiene dentale. Di seguito si è passati alla protesi inferiore che è stata avvitata su 8 impianti con esagono interno e incollata su basi in titanio in modo da poter assicurare la passività della struttura protesica in bocca.

Sulla base della nostra pluriennale esperienza possiamo affermare che determinati lavori protesici offrono maggiori garanzie all'odontoiatria, al paziente e anche a noi odontotecnici. L'impiego di questa tecnica richiede certamente una maggiore cura nella progettazione e nel trasferimento delle registrazioni, ma ci offre anche la possibilità di ottenere risultati straordinari in termini di funzionalità senza compromettere l'aspetto estetico.

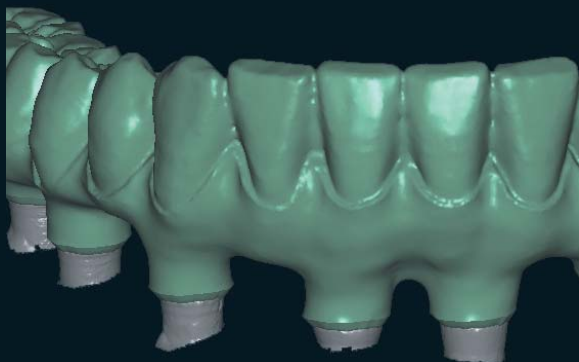

Il Prettau® Bridge

Luca Nelli, Italia

Dr. Paolo Sandri, Italia



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5831=

Fresato con il Zirkonzahn sistema CAD/CAM 5-TEC