

# Zirkonzahn®

I.P.

*Human Zirconium Technology*




**100% ZIRCONIA PRETTAU® – MADE BY CAD/CAM**

*“Con zelo verso la perfezione” Enrico Steger*

## *Metodo CAD/CAM per protesi fisse e mobili in Zirconia Prettau®*

Un paziente di 68 anni di sesso maschile non è più soddisfatto dell'estetica della propria dentatura e desidera risistemare integralmente mascella e mandibola senza pre-trattamento ortodontico e con un intervento chirurgico di minima portata. Al fine di mascherare le posizioni errate dei denti e di ristabilire il rapporto estetico tra larghezza e altezza delle corone, si progetta la protesi in modo da prevedere l'inserimento di parti mucose in ceramica rosata. I tradizionali ausili di posizionamento per uso diagnostico vengono trasformati, con la tecnica CAD/CAM, in provvisori acrilici. Dopo un periodo di adattamento clinico e di prova, i provvisori vengono copiati esattamente - mediante una doppia scansione - in una protesi fissa mascellare in zirconia e in una protesi mobile mandibolare in zirconia.

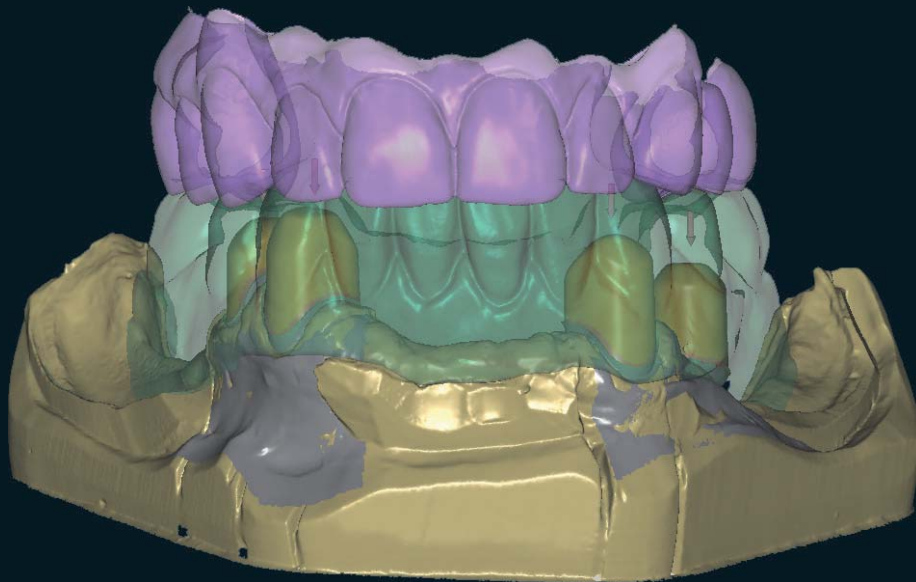

## *Il Prettau® Bridge*

Dr. Nico Bühler

Mauricio Cuéllar de la Torre – Zirkonzahn Education Center



# Zirkonzahn®



*Fresato con il Zirkonzahn sistema CAD/CAM 5-TEC*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com*



WEAA5832=

*Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 24.09.2021*