


# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



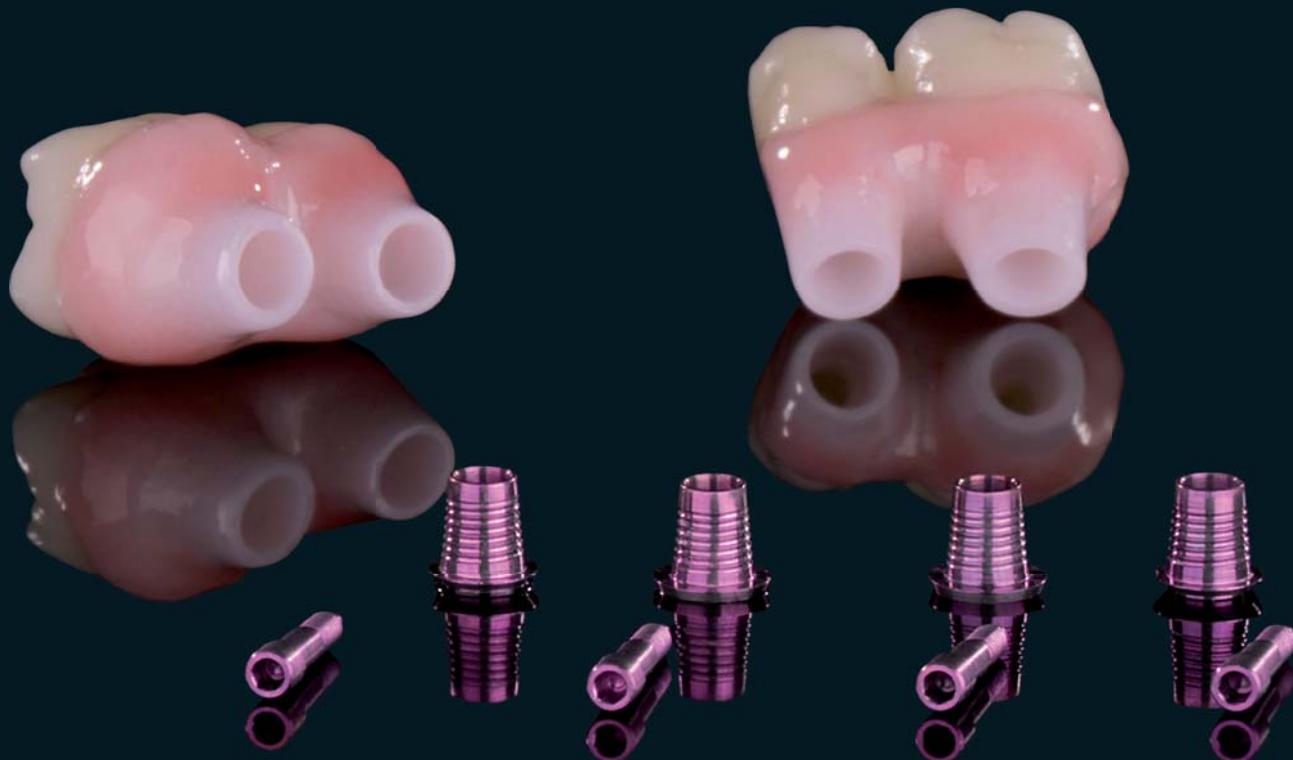


**100% ZIRCONIA PRETTAU<sup>®</sup> – MADE BY CAD/CAM**

*“La zirconia ha bisogno di eroi” Enrico Steger*

## *Ponte segmentato in Prettau® su impianti per il mascellare superiore e abutment in zirconia individuali*

A causa della scarsa disponibilità iniziale di sostanza ossea nel settore anteriore superiore, nel caso clinico considerato gli impianti hanno dovuto essere inseriti con un'inclinazione sfavorevole in direzione vestibolare. I canali per le viti sono quindi risultati rivolti in direzione labiale; per questo motivo è stato deciso, in accordo con l'odontoiatra, di realizzare abutment in zirconia individuali. Gli abutment sono stati fissati alle basi in titanio Zirkonzahn e anodizzati nel colore della gengiva per garantire un passaggio armonioso dall'estetica bianca a quella rosa. In seguito sono state pianificate le sovrastrutture. Nel settore posteriore, sui denti 15-16 e 25-26 sono stati progettati due ponti monolitici, avvitabili dal lato oclusale, mentre per il settore anteriore è stata realizzata una struttura da rivestire in ceramica e da cementare intra oralmente con gli abutment individuali. Dopo la fresatura, le strutture in zirconia sono state colorate individualmente con Colour Liquid Prettau® Aquarell e ultimate dopo la sinterizzazione con la ceramica ICE Zirkon e i Colori da pittura ICE Zirkon 3D by Enrico Steger.

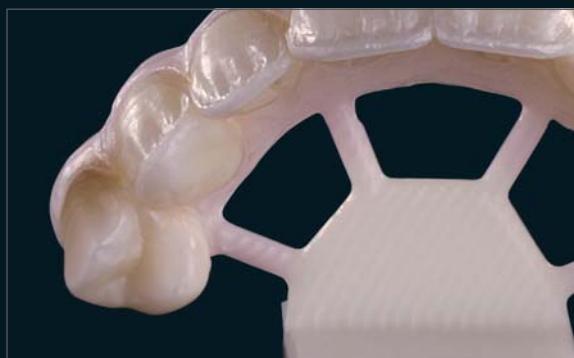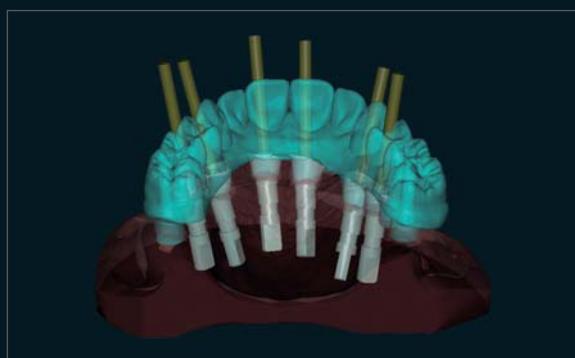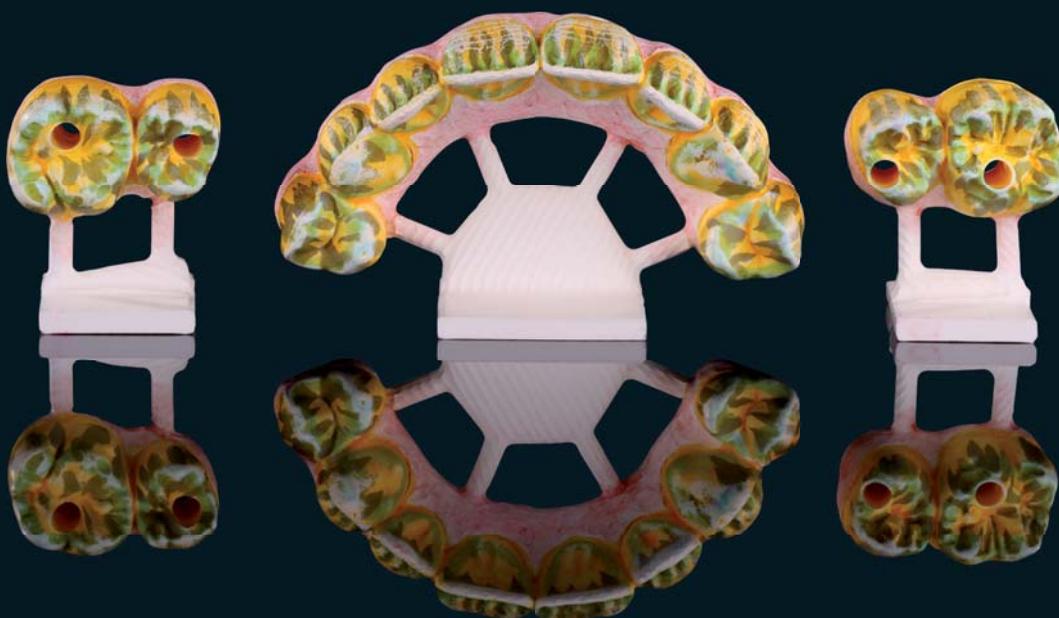

## *Prettau® Bridge*

Prof. Dr. Wael Att – Clinica universitaria di Friburgo, Germania

Manfred Pörnbacher – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige



# Zirkonzahn®


DATE DELLE  
CONFERENZE DI  
**ENRICO  
STEGER**  
.....  
[WWW.ZIRKONZAHN.COM](http://WWW.ZIRKONZAHN.COM)



*Fresato con il sistema CAD/CAM 5-TEC*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) – [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)*

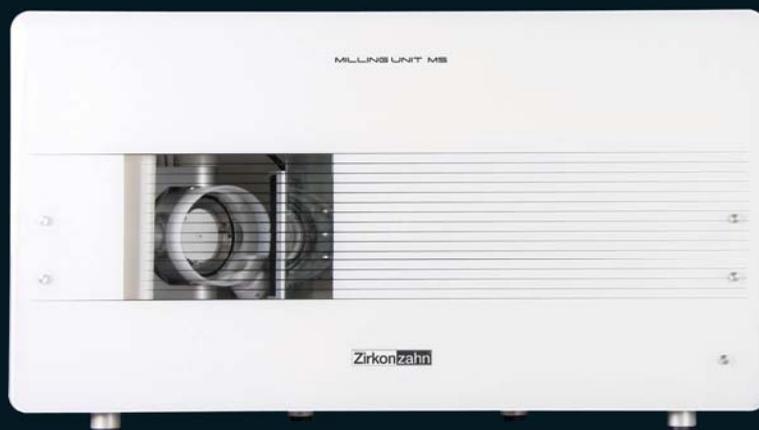

WEAA5854=

*Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 18/02/2015*