

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU[®] – MADE BY CAD/CAM


“La zirconia necessita di eroi” Enrico Steger

Prettau® Bridge: La facile soluzione di un caso difficile

Il notevole grado di riassorbimento osseo del presente caso ed il conseguente rapporto mascellare fortemente alterato costituiva un grande problema estetico-funzionale. La necessaria valutazione preliminare dei parametri del complessivo è stata risolta con l'aiuto di due provvisori. La struttura in resina ottimizzata sul paziente è stata quindi riprodotta fedelmente in zirconia Prettau®. **I motivi della scelta Prettau® sono tanti:**

1. Biocompatibilità e lucidabilità. La terza classe oclusale crea un cantilever sulla cresta ossea superiore e il paziente deve avere la possibilità di attuare una buona igiene orale.
2. Rigidità e passività. La presenza di impianti zigomatici rende fondamentali queste proprietà della struttura.
3. Affidabilità ed estetica. In una ricostruzione implantare in antagonismo, la realizzazione di una struttura portante monolitica molto traslucida integrata da piccole zone protette stratificate in ceramica permette il raggiungimento di elevati valori di robustezza, estetica e funzionalità evitando scheggiature o "chipping".
4. Possibilità di poter colorare anche l'estetica rosa. I colori della serie Color Liquid Prettau® Aquarell, privi di acidi, e la speciale tecnica di applicazione donano una colorazione di base naturale. Di conseguenza è stato possibile stratificare in misura molto ridotta sia l'estetica rosa che quella bianca, lasciando in Prettau® il contatto con le mucose, tutti i contatti di centrica e i piani di scivolamento oclusali.

La struttura è stata poi finalizzata incollando gli ingaggi implantari in titanio precedentemente anodizzati.

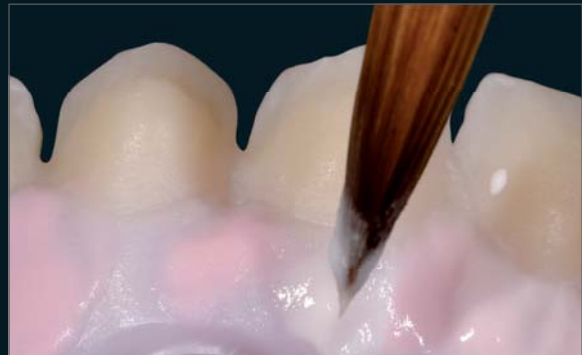

Prettau® Bridge

Odt. Fabio Levratto, Principato di Monaco

Clinico Dr. Proff. Gérard Scortecchi, Nizza (Francia)



Zirkonzahn®

DATE DELLE
CONFERENZE DI
**ENRICO
STEGE**
WWW.ZIRKONZAHN.COM

Fresato con il sistema CAD/CAM 5-TEC

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



WEAA5858=

Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 27/05/2015