

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100% CYRKON PRETTAU - MADE BY CAD/CAM

“Cyrkon potrzebuje bohaterów” Enrico Steger

Cyrkon Prettau

Chcąc udowodnić funkcjonalność tego typu konstrukcji protetycznych, wykonujemy we współpracy z dr Thomasem Suranyi i Lyndon F Cooper DDS PhD kilka rodzajów podbudów. Przed rozpoczęciem pracy nad finalną wersją podbudowy, ostatecznie opracowana konstrukcja jest frezowana w żywicy. Ta podbudowa pozostaje w ustach pacjenta od sześciu do dziewięciu miesięcy. Celem pracy z wersją tymczasową jest umożliwienie technikowi dentystycznemu spełnienia wszystkich oczekiwań pacjenta związanych z protezą. Pacjenci bardzo często proszą o wprowadzenie niewielkich zmian w swoich protezach, co bardzo łatwo wykonuje się w modelu z żywicy. Jako że żywica jest miękka i łatwa w obróbce przy pomocy standardowych wiertel, dentysta z łatwością może wprowadzić zmiany w zakresie dopasowania, okluzji i estetyki w tym okresie. Zmiany w kształcie zębów i linii uśmiechu mogą być przeprowadzone przy użyciu kompozytów Chairside. Większość stomatologów jest biegła w pracy z kompozytami i wprowadza doskonałe modyfikacje na potrzeby pacjenta, które pomagają w poprawie jakości rezultatu końcowego.

W momencie gdy pacjent jest usatysfakcjonowany ogólnym dopasowaniem, funkcjonalnością i wyglądem, końcowa odbudowa może zostać precyzyjnie skopiowana, przy wykorzystaniu podwójnego skanowania w cyrkonie Prettau. Powierzchnie przedstonkowe są licowane zaś tkanka dziąsłowa tworzona jest z użyciem różowej masy ceramicznej. Rezultatem końcowym jest nieprawdopodobnie piękna, funkcjonalna i stabilna odbudowa.



100% żywica

Most Prettau

Dr. Thomas Suranyi and Lyndon F Cooper DDS PhD – Uniwersytet Południowa Karolina
Georg Walcher, Mauricio Cuéllar – Centrum Kształcenia Zirkonzahn



Zirkonzahn®




Wyfrezowane w systemie CAD/CAM 5-TEC

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN POLAND - I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok - Tel. 501 603 603

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

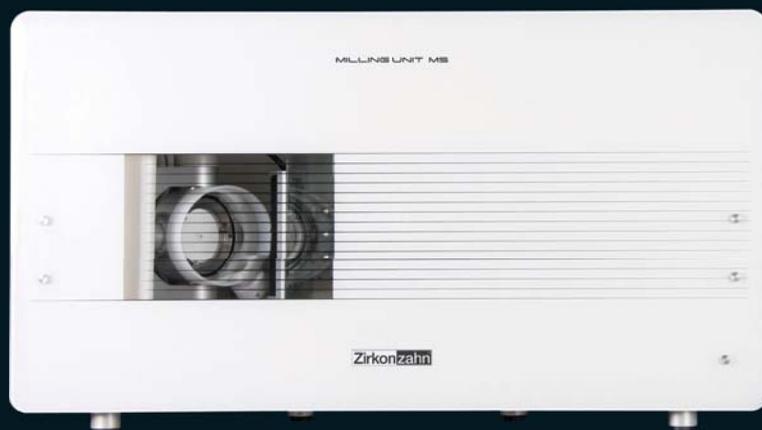

WEAA6428=

Wszystkie dane mogą ulec zmianie. Mogą zaistnieć pomyłki. Wersja: 15.07.2013