

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] SKIN[®]


KULTURA ZIRKONZAHN

MINIMALNIE INWAZYJNA ODBUDOWA ULTRA CIENKIMI LICÓWKAMI Z CYRKONU (PRETTAU® SKIN®)

Planowana odbudowa: Licówki monolityczne (Prettau® Skin®), częściowe korony i trzypunktowy most z tlenku cyrkonu Prettau® 2 Dispersive®

Realizacja:

- Określenie koloru zębów za pomocą Zirkonzahn Shade Guide Prettau® 2 Dispersive®
- Wirtualna artykulacja modelu zgodnie z podejściem MDT Udo Plaster (PlaneSystem®)
- Set-up w oprogramowaniu Zirkonzahn.Modifier oraz indywidualna charakteryzacja zębów AIDA z wirtualnej biblioteki Heroes Collection
- Wyznaczenie optymalnego toru wprowadzenia. Blokowanie modelu górnego i dolnego pod mock-up
- Nesting mock-up w bloczku z żywicy Temp Premium Flexible i frezowanie; przymiarka w ustach pacjenta
- Cyfrowa regulacja ustawienia set-up i tworzenie wzorników preparacji: narzędzia komunikacji używane przez technika dentystycznego do sugerowania dentyście, które obszary zęba należy przygotować do minimalnie inwazyjnej preparacji. W ten sposób pomysły funkcjonalne i estetyczne technika dentystycznego mogą zostać uwzględnione w końcowym efekcie.
- Minimalnie inwazyjna preparacja zębów
- Projektowanie i frezowanie ultracienkich licówek (0,2 mm), koron częściowych i mostu trzypunktowego przy użyciu tlenku cyrkonu Prettau® 2 Dispersive®
- Synteryzacja i charakteryzacja za pomocą ICE Stains 3D by Enrico Steger
- Zacementowanie ostatecznych uzupełnień w ustach pacjenta

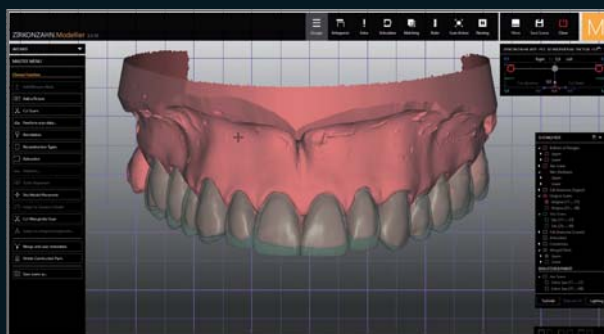

W 100% STWORZONY CYFROWO, MONOLITYCZNY DESIGN

Dr. Francisco García Torres – Meksyk

DT Alexander Lichtmanegger – Centrum Edukacyjne Zirkonzahn Brunico, Południowy Tyrol, Włochy



NOWOŚĆ! PRETTAU® SKIN®

Nowa technika tworzenia ultracienkich licówek Prettau® – Pacjenci mogą uzyskać zdrowy uśmiech przy zerowym lub minimalnym uszkodzeniu tkanki zęba. Nowa technika nadaje się do estetycznej korekcji przebarwień zębów, braków zębowych, zębów krzywych, stożkowych i zębów startych.





NOWOŚĆ! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Wstępnie barwiony tlenek cyrkonu z naturalnym gradientem koloru, optymalną wytrzymałością na zginanie i szczególnie wysoką przejrzystością
- Bez ograniczeń! Idealny do monolitycznych mostów pełnych łuków, ale także do pojedynczych koron, inlay, onlay, licówek, belek i mostów wielopunktowych (zredukowanych lub monolitycznych)
- Brak odprysków ceramiki (dzięki monolitycznej konstrukcji), brak ścierania antagonisty
- Można ucharakteryzować indywidualnie dla każdego pacjenta za pomocą Color Liquids Prettau® Aquarell Intensive, ICE Ceramics, Fresco Ceramics i ICE Stains 3D by Enrico Steger




HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Poland – ul. Siewna 9, 15-183 Białystok – Tel + 48 501 603 603

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOWOŚĆ! 1 ORBITA – 4 ŚREDNICE 125, 106, 98 | 95 mm

FREZARKA M2 Z LINII KOMFORT Z BARDZO DUŻĄ ORBITĄ, TELESKOPOWA, W PEŁNI AUTOMATYCZNA, ELASTYCZNA, BEZ WIBRACJI

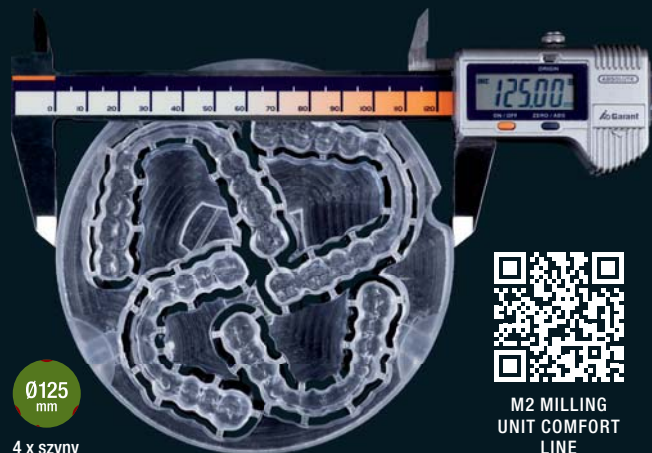

WEAB2689PL=