

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**PRETTAU<sup>®</sup> 3 DISPERSIVE<sup>®</sup>**

*A cultura Zirkonzahn*

## RESTAURAÇÃO COMPLETA COM COROAS INDIVIDUAIS EM PRETTAU® 3 DISPERSIVE®

*Situação inicial:*


*Paciente jovem com amelogenese imperfeita e margens gengivais assimétricas*

*Dados disponíveis:*

*Fotografias, radiografias, digitalizações intra-orais, digitalizações faciais em 3D*

*Fluxo de trabalho:*

- Articulação digital com o PlaneFinder® no software Zirkonzahn.Modifier
- Planificação virtual dos dentes e individualização das formas dentárias RHEIA e AIDA seleccionadas da biblioteca virtual Heroes Collection
- Desenho do Mock-up superior e inferior; fresagem em resina Multistratum® Flexible e prova na boca da paciente
- No software Zirkonzahn.Modifier: criação digital de um guia gengival para gengivectomia
- Preparação minimamente invasiva dos dentes naturais pelo dentista
- Produção de uma restauração provisória em resina Multistratum® Flexible, usada pelo paciente até à inserção das restaurações definitivas em zirconia para verificar a oclusão e o aspeto estético
- Desenho e produção de 27 coroas individuais em resina Exmon® Basic X-Ray para controlo imediato do ajuste por raios X
- Desenho e realização das coroas individuais minimamente reduzidas em zirconia Prettau® 3 Dispersive® no software Zirkonzahn.Modellier
- Infiltração das coroas com Colour Liquids Prettau® Aquarell Boost®, caracterização com ICE Stains 3D by Enrico Steger e estratificação mínima com Fresco Ceramics
- Cimentação das coroas em zirconia na boca da paciente

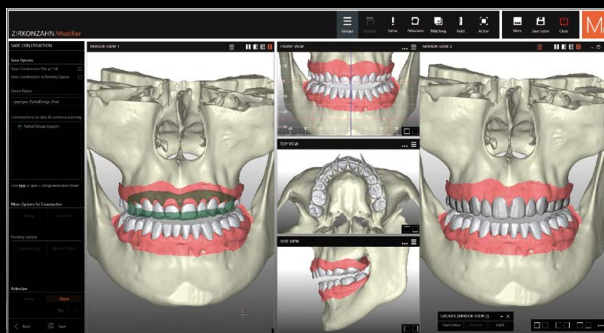

# DA VISÃO À REALIDADE: UM CASO REALIZADO INTEIRAMENTE EM DIGITAL

*Dr. med. dent. Holger P. Meiser – Holger Dental Group, Minnetonka, EUA*

*TPD Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tirol do Sul, Itália*

LER TODA A  
DESCRIÇÃO DO CASO!



[r.zirkonzahn.com/sv3](https://r.zirkonzahn.com/sv3)



# Zirkonzahn®

MAIS INFORMAÇÕES  
SOBRE A NOSSA ZIRCONIA  
PRETTAU® 3 DISPERSIVE®



r.zirkonzahn.com/tq7



## NOVO! PRETTAU® 3 DISPERSIVE®

- Zirconia caracterizada já durante a produção por um triplo gradiente de cor, translucidez e resistência à flexão
- **Gradual-Triplex-Technology:** cor natural, elevada translucidez no bordo incisal e aumento da resistência à flexão no colo do dente
- Para coroas individuais, inlays, onlays, facetas e pontes de vários elementos suportadas por barras (para estruturas reduzidas ou monolíticas); particularmente adequada para estruturas monolíticas
- Sem lascas de cerâmica (devido ao desenho monolítico) ou abrasão dos antagonistas
- Caracterização individual do restauro com Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensivos, ICE Ceramics, Fresco Ceramics, ICE Stains Prettau® e ICE Stains 3D by Enrico Steger

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Portugal – Luis Macieira – Tel +351 217 58 62 69 – zirkonzahnportugal@clix.pt

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

## NOVO! 1 ÓRBITA – 4 DIÂMETROS (95, 98, 106 E 125 mm)

PARA A LINHA DE FRASADORAS CONFORT M2, A FRESADORA M4 WET HEAVY METAL E A NOVA FRESADORA M6 TELESKOPER BLANK CHANGER



r.zirkonzahn.com/r10

VIDEO  
LINHA DE  
FRESADORAS  
CONFORT M2



WEAB2703PT=

Este documento destina-se a um público internacional. Nem todos os produtos mencionados estão disponíveis em todos os países. A área de aplicação do produto pode variar consoante o país. Contacte a sua equipa de vendas, para obter mais informações. Copyright © Enrico Steger. Versão: 25/07/2024