


Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology

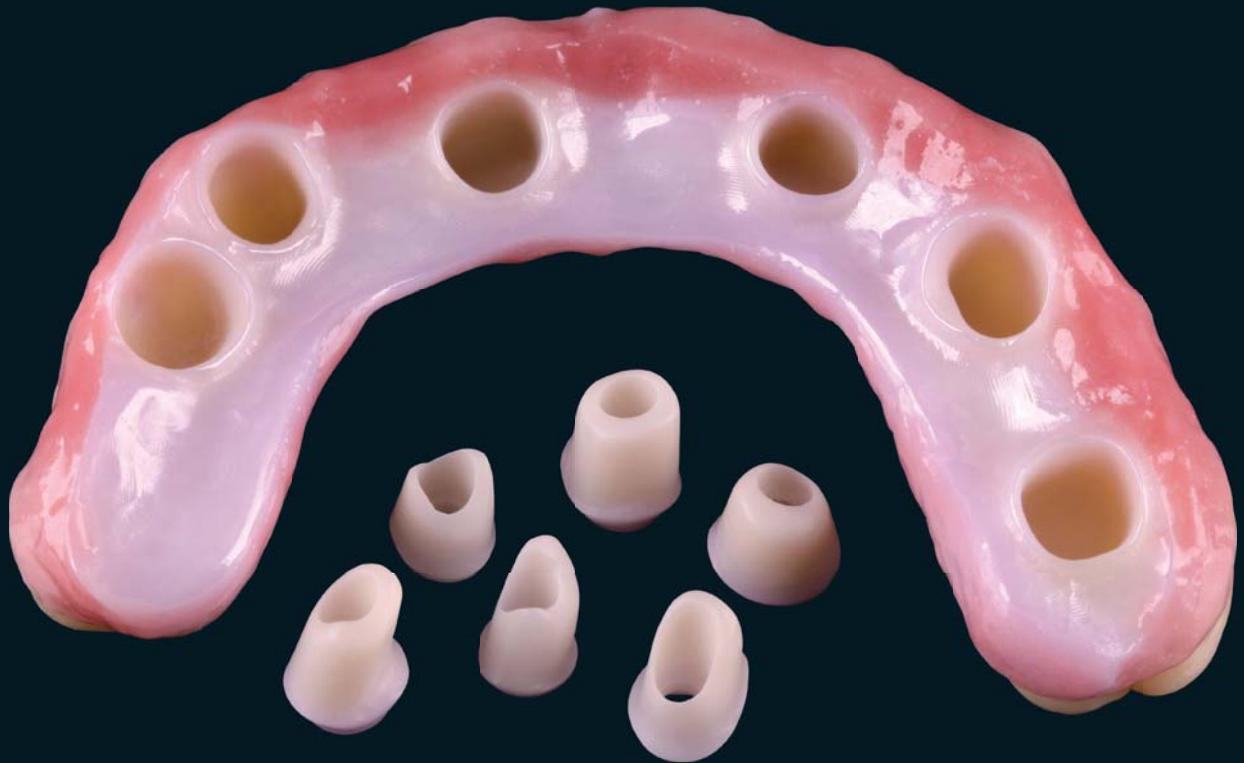

100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM

„O Zirconia necessita de Heróis“ Enrico Steger

Zirconia Prettau

Segundo o acordado entre o dentista, o paciente e o técnico planeou-se realizar uma ponte em Zirconia Prettau de dez elementos sobre seis implantes. Para este trabalho usamos o sistema CAD/CAM 5-TEC de 5 eixos da seguinte forma.

Realizou-se uma montagem de dentes sobre o modelo sem pilares realizando posteriormente a digitalização da mesma. Depois preparou-se a estrutura com base na técnica de dupla digitalização. Durante a prova verificou-se em detalhe a oclusão e foram feitos os necessários ajustes. No seguimento foi usada de novo a técnica de dupla digitalização para obter a estrutura sobre os pilares, e usando a estrutura de resina já ajustada em boca. O software compõe então a imagem final com base na dupla leitura e gerou virtualmente o trabalho com a forma final que foi fresado em Zirconia Prettau com a fresadora CAD/CAM 5-TEC de 5 eixos.



Prettau Bridge

Centro de formação Zirkonzahn

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Espanha



Zirkonzahn®




Fresado com o sistema CAD/CAM 5-TEC da Zirkonzahn

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - zirkonzahnportugal@clix.pt

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

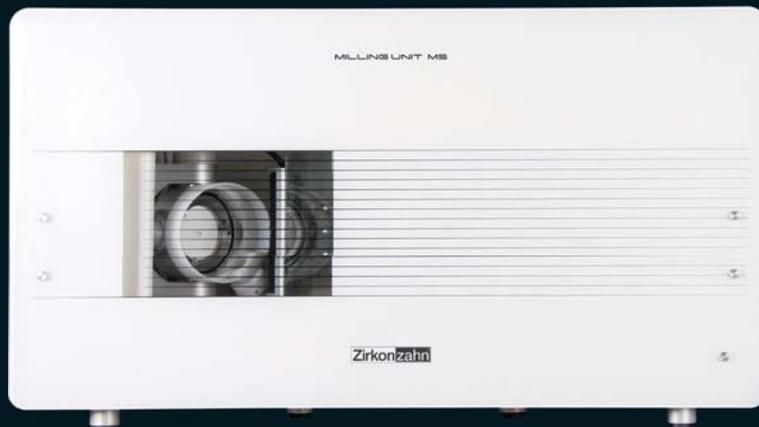

Informações sujeitas a alterações. Versão: 15.07.2013