

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® 2 ZIRCONIA – MADE BY CAD/CAM

“Com diligência até a perfeição” Enrico Steger

PRETTAU® BRIDGE EM PRETTAU® 2 ZIRCONIA COM BASES EM TITÂNIO ANODISADO

Aparência natural, estabilidade, conforto e uma excelente bio-compatibilidade – a zirconia, trabalhada por especialistas, está à altura do desafio de uma prótese dentária de qualidade e duradoura. No entanto a zirconia não é toda igual. Principalmente em relação à translucidez e resistência à flexão os materiais diferenciam-se. Conforme as indicações deverá escolher-se a melhor combinação de características. Do ponto de vista mecânico, e para além das características estéticas, para a produção de uma arcada completa é principalmente importante o nível de resistência à flexão. No presente caso decidiu-se por um trabalho em Prettau® 2 Zirconia. Neste produto conseguiu combinar-se uma resistência à flexão excecional e uma translucidez excelente. Antes da implementação final da Prettau® Bridge sobre implantes em Prettau® 2, foi feito um protótipo de resina Multistratum® Flexible, com base em modelos mestre, assim como dados digitais 3D do paciente, o qual foi usado vários meses à experiência. Através da digitalização do provisório com o Scanner S900 ARTI, foi possível considerar na restauração final, mudanças que resultaram do período de utilização. A Prettau® Bridge foi concebida com o Cut-back-Design da biblioteca dentária virtual “Heroes Collection” e fresada com a fresadora MI Wet Heavy Metal. Com a coloração manual das novas Colour Liquids, o revestimento com ICE Zirkon Keramik, assim como a aplicação de pigmentos, individualizou-se a restauração. Para a estabilidade, e antes da colocação da estrutura Prettau® 2 na boca do paciente, foram-lhe cimentadas bases douradas em titânio.



100% FUNÇÃO E ESTÉTICA

TD Federico Presicci – Education Center Brunico, Tirol do Sul



NOVO! PRETTAU® 2

- Zirconia particularmente translúcida e compatível com uma excepcional resistência à flexão e à fratura
- Sem limitações! Particularmente apropriado para pontes de arcada (completas ou reduzidas para revestimento em cerâmica), mas também para coroas individuais, Inlays, Onlays, revestimentos, barras e pontes de vários elementos
- Através da conceção anatômica não evita fissuras ou abrasão em relação dos antagonistas
- Passível de caracterização individualizada com as Colour Liquids Prettau® 2 Aquarell, ICE Zirkon Keramik e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger
- Brevemente também disponível em monocromático (Prettau® 2 Coloured) e com uma gradação natural pré-colorida (Prettau® 2 Dispersive®)



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

PRETTAU®

T1



COLOUR
LIQUID

PRETTAU® 2


T2



DISPERSIVE®

PRETTAU® 3


T3

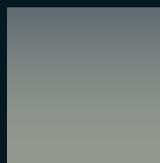

DISPERSIVE®

PRETTAU® 4
ANTERIOR®

T4

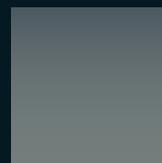

DISPERSIVE®



WEAA5969=